



Ki Little Wave Clik

Ein Kinderrollstuhl für die nächste Generation


Ki Little Wave Klik

Du bist nur einen “Klik” von der Perfektion entfernt.

Little Wave Klik, der intuitivste Kinderrollstuhl, entwickelt sich und wächst mit dem Kind.

Gestaltet für die nächste Generation

Ein Verstellsystem, das präzise und einfache Wachstumsoptionen bietet. Ein System, das mit nur einem “Klick” so einfach einzustellen ist, dass es die richtige Positionierung und den Zugang zu den Rädern fördert, damit Ihr Kind die aktive Unabhängigkeit und Mobilität erlangt, die es sich wünscht. Little Wave Klik bietet alle Möglichkeiten, um die Bedürfnisse Ihres Kindes zu erfüllen.

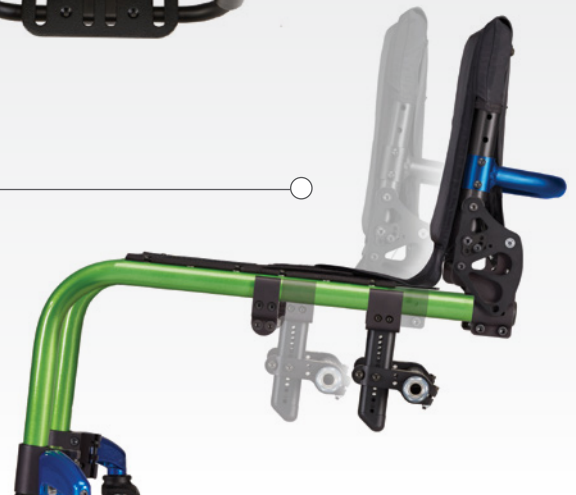

Entwickelt sich und wächst mit Ihrem Kind.

Sitzhöhe, -breite, -tiefe, Schwerpunkt, Lenkradposition, Sitzpolsterung, Sitzschalen... die meisten eingebauten Einstellmöglichkeiten. Mit all diesen Möglichkeiten war es noch nie so einfach, die Bedürfnisse von Kindern zu erfüllen.



Mit Zuversicht die Welt Ihres Kindes erweitern.

Die Fähigkeit, sich im Raum zu bewegen, ist eine wesentliche Phase der Neuroentwicklung. Die Herausforderung besteht darin, Sicherheit und Stabilität zu gewährleisten. Das einstellbare dynamische 5. Rad macht dies möglich, indem es Ihnen erlaubt, die Reichweite und die Federrate einzustellen. Ob in der Mitte des Rades für die kleinsten Fahrer oder zur Förderung und Schulung des Gleichgewichts und der Radfahrfähigkeiten, die das Selbstvertrauen fördern, um alltägliche Hindernisse und Gelände zu überwinden. Dynamisch sein.

Eigenschaften



Das Verstellsystem ist so konzipiert, dass es genaue und einfache Wachstumsoptionen bietet. Erfüllen Sie die Bedürfnisse der Kinder nach Unabhängigkeit und Mobilität mit nur einem "Klick".



Ob für Mama, Papa, Schwester, Bruder, Freund oder Betreuer - der höhenverstellbare Ergo-Kinderwagengriff ist die ergonomische Wahl für alle.




Mit dem zugänglichen Platz am Rahmen vermeiden Sie Konflikte und erhalten Zugang zu Klemmzubehör, wo Sie es brauchen.



Der Offset-Rahmen sorgt dafür, dass Ihr Kind die richtige Passform hat. Mehr Platz für abduzierte Positionierung, Knöchel-Fuß-Orthesen und Hosenträger.

Optionen

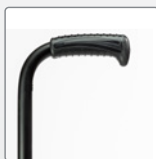

Schiebegriff
Gerade.



Kippschutz




Fußplatte
Hohe Montage, winkelverstellbar, klappbar.




Fußplatte
Winkelverstellbar.



Fußplatte
Winkel einstellbar mit Erhöhung.

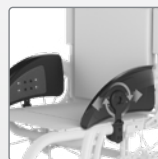

Schutzblech
Verstellbares Aluminium-Schutzblech mit Schaumstoffpolster.

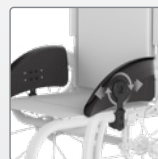

Schutzblech
Einstellbares Schutzblech aus Kohlefaser.



Personalisierung mit Farbe

Besuchen Sie etac.de für weitere Optionen und Zubehör.

Spezifikationen

Little Wave Clik

Transportgewicht:	5,67 kg*
Sitzbreite:	20 - 46 cm
Sitztiefe:	20 - 46 cm
Sitzhöhe vorne:	29 - 51 cm
Sitzhöhe hinten:	29 - 52 cm
Größe der Rohre:	2,85 cm
Max. Belastbarkeit:	75 kg
WC-19 Transit:	Ja

*12" x 12" Rahmen mit höhenverstellbarer Rückenlehne, 4" Poly-Rollen, winkelverstellbare Fußplatte und Standardpolsterung. Armlehne und hintere Räder entfernt.

Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities