



Ki Rogue XP

Konzipiert für aktive Heranwachsende

Rogue XP

Wachstum mit Weitblick

Rogue XP ist der erste leichte und starre Rollstuhl für Jugendliche, der das Aussehen eines Erwachsenenrollstuhls und das Wachstum eines Kinderrollstuhls hat.

Du bist jung.

Du bist aktiv.

Du bist du.

Rogue XP ist der ultimative Performance-Stuhl, der Sie dazu ermutigt, Ihren persönlichen Stil zu verwirklichen. Das leichte Design bietet eine optimale Reaktion bei jeder Bewegung und mit der kreativen Auswahl an Rahmen, Farben und Rädern können Sie mit dem Rogue XP ganz Sie selbst sein.



Vom Einsteiger zum Meister der Mobilität

Mit dem einstellbaren dynamischen fünften Rad können Erstnutzer sicher die Welt entdecken und gleichzeitig Antrieb, Technik und Stabilität erlernen. Sie können den Bereich und die Federrate einstellen, um sich zu sichern und zu treffen, wenn sich die Fähigkeiten entwickeln.





Kreative Freiheit

Ob Sie nun einzigartig, schick, ausgefallen oder minimalistisch sind... wählen Sie Ihren Rahmen, Ihren Akzent. Seien Sie kreativ. Der Rogue XP ist Ihre leere Leinwand.

Integriertes Wachstum

Optimieren Sie Passform, Funktion und Fahrverhalten mit bis zu 7,5 cm Tiefen- und Breitenwachstum. Der Rogue XP passt sich mit der Zeit an, sodass das Herauswachsen aus dem Stuhl ein Problem der Vergangenheit ist.

Eigenschaften



7,5 cm Sitzbreitenverstellung.
Sitzbreite: 25-45 cm.



7,5 cm Sitztiefenverstellung.
Sitztiefe: 25-51 cm.



Integrierte Sitzhöhenverstellung
und RP-Tuning-
Rollenwinkelverstellung.



Zahlreiche Fußstützen zur
Anpassung an individuelle
Bedürfnisse.

Optionen



Schiebegriffe

Gerade mit ergonomischem Griff.



Klappbare Schiebegriffe



Fußplatte

Einstellbar und klappbar.



Fußplatte


Winkelverstellbar.



Kippschutz




Transportbeschläge
Zugelassen für den
Transport in Fahrzeugen
(ISO 7176-19).

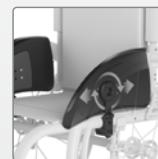

Schutzblech

Verstellbares
Aluminium-Schutz-
blech mit Schaum-
stoffpolster.

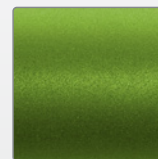

Personalisierung mit Farbe

Besuchen Sie etac.de für weitere Optionen und Zubehör.

Spezifikationen

Rogue XP

Gewicht beim Transport	5,26 kg*
Sitzbreite	25,4–46 cm
Sitztiefe	25,4–51 cm
Sitzhöhe vorne	34,3–52 cm
Sitzhöhe hinten	29–51 cm
Größe der Rohre	3,5 cm
Max. Belastbarkeit	90,72 kg

WC-19 Transit:

Ja

*Gewicht berechnet auf der Grundlage von:

14 x 14" Rahmen, keine Armlehnen, ohne Räder.

Etac ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Hilfsmittel für die Patientenversorgung. Seit 1973 engagieren wir uns für die Verbesserung der Lebensqualität des Einzelnen, der Familienmitglieder und des Pflegepersonals.

Für den Verwendungszweck unserer Produkte und aktuelle Informationen besuchen Sie www.etac.de

Etac GmbH

+49 2366 5006-0

info@etac.de

www.etac.de

etac[®]
Creating Possibilities