


Produktark


Pure L2 dusj- og stellevogn, elektrisk



Todelt dusj- og stellevogn med elektrisk hev- og senkfunksjon.

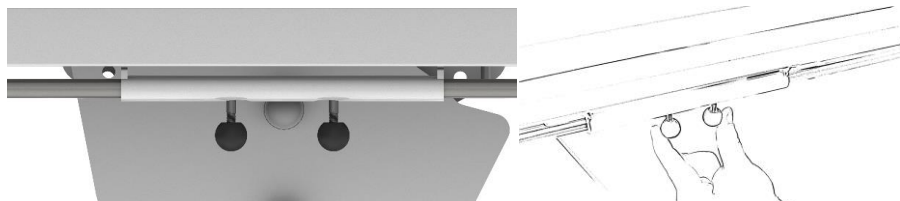

Sidegrind felles ned ved å bruke én hånd til å klemme spakene sammen.

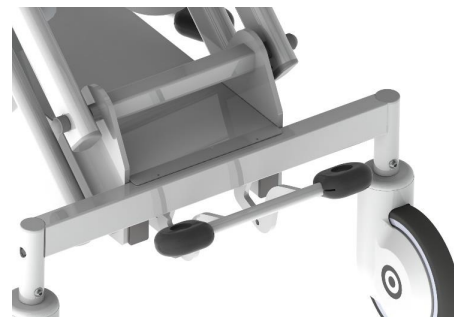

Sentralbrems er plassert ved hodeenden av vognen.

- Vognen har en maksimal brukervekt på 180 kg, med maksimal totalbelastning på 200 kg.
- Enkel å manøvrere med store hjul på 150 mm, og mulighet for å låse retningen på ett hjul.
- Intuitiv håndkontroll med opphengskrok som lar pleier heve og senke vognen.
- Høyden kan justeres mellom 54 og 97 cm.
- Alle fire hjul låses med en sentralbrems plassert ved hodeenden av sengen.
- Utvendig måler vognen 209 x 81 cm, som gjør at den kan trilles gjennom dører med vanlig bredde.
- Liggedelen av vognen kan tiltes fra 0 - 5° ved hjelp av gassfjærer.
- Hodedelen er 70 cm lang, og kan trinnløst tiltes fra 0 til 25° ved hjelp av en rastomat.
- Sidegrindene måler 205 mm i høyden, og kan felles ned ved forflytning til seng.
- Leveres med madrass med PVC-trekk, samt sluk og avløpsslange for avrenning. Madrassen har en fordypning i midten av madrassen i lengderetningen for rask drenering. PVC-trekket er ikke glatt, men likevel enkelt å rengjøre.
- PVC-trekket kan desifiseres mens det er på madrassen, eller tas av for enda grundigere vask.



Håndkontrollen lar pleier heve og senke vognen. Tåler å vaskes.

Beskrivelse

Størrelse (BxL)

Art. nr.

Tekniske spesifikasjoner

Pure L2 209 x 81 cm K015068962

Maks brukervekt	180 kg
Maks belastning	200 kg
Innvendig lengde	190 cm
Innvendig bredde	65 cm
Vekt	103 kg
Låsbare fjul	4 stk
Tilt på hele liggedelen	0 - 5°
Tilt på hodedelen	0° til 25°