

etac[®]
Creating Possibilities



R82[®]

Chilla

Utviklet for å gi barnet bedre komfort, stabilitet og sikkerhet

Er du klar for eventyr?

R82 Chilla er en allsidig sittevogn som gir barnet en trygg og komfortabel sittestilling, enten det er i byen eller i naturen. Setet på Chilla kan vendes både bakover og fremover, alt ettersom hva behovet er. Her kan man justere både setedybde og rygg høyde, og det er også mulig å endre setebredde og ryggbredde ved hjelp av tilbehør til vognen. Ryggen til Chilla kan tiltes ned slik at barnet kan hvile eller sove. Det er enkelt å legge vognen sammen, og det er også mulig å legge sammen rammen og setet hver for seg. Chilla er i samsvar med ISO 7176-19, som betyr at den er sikker for transport i motorkjøretøy.



Skreddersydd støtte for vekst

Chilla er laget for komfort, stabilitet og sikkerhet. Vognen har en rekke funksjoner som gjør det enkelt å skreddersy passform etter barnets behov. Chilla vokser med barnet og tilpasses deres skiftende behov over årene.

Med justerbar setelengde og ryggghøyde, kombinert med et utvalg av tilbehør kan Chilla brukes i flere år.

Det finnes et stort utvalg av tilbehør som forbedrer både funksjonalitet og bekvemmelighet.



Komfort og sikkerhet

Chilla er designet med fokus på komfort og sikkerhet. Her kombineres komfortable puter, vest og belte, samt justerbar fjæring for å gi komfortable og trygge turer på forskjellige terreng. Chilla er krasjtestet og overholder ISO 7176-19 for sikker transport i motorvogn.

Chilla har myke og komfortable puter med 30 mm skum. Kombinasjonen av komfortable puter, tillegg av vest og belte, samt den justerbare fjæringen, gjør at Chilla gir en veldig behagelig og trygg tur på de fleste terreng.

Enkle og verktøyfrie justeringer

Her er det enkelt å gjøre justeringer etter behov i hverdagen. Chilla-setet kan vendes både fremover og bakover, slik at barnet kan se omgivelsene eller ha komforten av å kunne se foreldrene sine. Å snu setet krever kun én operasjon av sikkerhetslåsen og tiltutløseren bak på setet.



Naturen kaller

Chilla har justerbar fjæring på rammen som gir flere fordeler. Stabiliteten til vognen når den beveger seg over terreng er god, og fjæringen hjelper til med å absorbere vibrasjoner og støt under bevegelse.

Fjæringen på Chilla har det som kalles ekte demping. Ekte demping, også kjent som kritisk demping, refererer til hvor raskt et system returnerer til sin likevektsposisjon uten å sprette frem og tilbake. For Chilla betyr dette at når fjæringen er belastet, vil den returnere til sin opprinnelige posisjon jevnt og uten å sprette.

Fjæringen kan justeres via tre forhåndsinnstilte innstillinger. Her er det enkelt å tilpasse ulike behov og andre omstendigheter. Hvis du eksempelvis trenger å montere en oksygenflaske på Chilla, vil belastningen på den siden være større enn på den andre siden. Med den justerbare fjæringen vil du på Chilla kunne jevne ut belastningen for å lettere manøvrere vognen.



Perfekt til utebruk

Chilla er en god vogn å bruke utendørs. Hjulene kommer i to typer: kompakte og luftfylte. Når du skal velge mellom disse er det viktig å veie de ulike fordelene basert på tiltenkt bruk. Kompakte hjul har fordelen av å eliminere irriterende punkteringer, mens luftfylte hjul kan forbedre barnets komfort ved å gi bedre støtdemping.

Ulike værforhold er ingen hindring for Chilla. Vognen kommer med valgfritt regntrekk som beskytter mot vind, regn og snø. I tillegg kan du velge mellom en standard kalesje, eller en premium kalesje for ekstra allsidighet og beskyttelse. Kalesjen beskytter mot sol og vind, men kan også brukes til å skjerme barnet mot omgivelsene. Premium-kalesjen har lufteluke som også kan fungerer som et vindu for foreldrene.

Standard kalesje



Premium kalesje



Oppreist posisjon



Halveis nede


















Halveis nede med åpen lufteluke

Lek ute

Det å være ute er godt både for kropp og sjel. Multisensorisk lek der barn kan berøre, lukte, høre og oppleve naturen bidrar til å stimulere sanser og kognitive evner i utvikling.



Mål

			1 Med fjæring		2 Med fjæring
	Effektiv setebredde		330 mm		380 mm
	Effektiv setedybde		180-340 mm		240-420 mm
	Ryggstøtkehøyde med plate for hodestøtte		505-665 mm		620-810 mm
	Ryggshøyde til skulder		365-525 mm		420-610 mm
	Setehøyde ved fremre kant		450 mm		450 mm
	Maks vekt utover brukervekt		43 kg		60 kg
	Maks brukervekt på ramme under transport		35 kg		50 kg
	Maks brukervekt på sittedel under transport		35 kg		50 kg
	Høyde		1200 mm		1200 mm
	Lengde		760 mm		760 mm
	Bredde		620 mm		680 mm
	Lengde sammenlagt		1035 mm		1035 mm
	Høyde sammenlagt		380 mm		380 mm
	Vekt ramme		9,7 kg		10 kg
	Vekt sittedel		5,3 kg		6,3 kg

*Flere mål finnes på vår nettside

Ulike farger



Grå puter

For str 1 og 2 - Kommer også i mesh-utførelse.



Røde puter

For str 1 og 2 - Kommer også i mesh-utførelse.



Blå puter

For str 1 og 2 - Kommer også i mesh-utførelse.

Funksjoner

Chilla er laget for komfort, stabilitet og sikkerhet. Vognen har en rekke funksjoner som gjør det enkelt å skreddersy passform etter barnets behov mens de utforsker verden.

Komfort og sikkerhet

Chilla er designet med fokus på komfort og sikkerhet. Her kombineres komfortable puter, tillegg av vest og belte, samt justerbar fjæring som gir en svært komfortabel og trygg tur på forskjellige underlag.

Enkel å frakte

Sittevognen kan enkelt legges sammen. Hvis bagasjeplassen er liten kan vognen deles i to og legges sammen for enda mer fleksibilitet.

Tilpasset utendørsbruk

Chilla kan brukes i all slags vær, regntrekket beskytter mot vind, regn og snø. Det er også mulig å velge mellom standard kalesje og premium kalesje. Vognen leveres som standard med sistnevnte.

Være aktiv eller planlegge en lur?

Enten du vil endre posisjon eller legge ned for soving, kan dette gjøres med bare en hånd. Chilla er designet med fokus på en sentrert rotasjonsakse for tiltfunksjonen. Dette gir en jevn endring og krever minimal kraft for å betjenes.

Justerbar fjæring

Chilla leveres med fjæring som standard. Fjæringen har det man kaller "ekte demping", som bidrar til at den vil returnere rolig til sin opprinnelige posisjon, uten å sprette tilbake.

Vekst og fleksibilitet

Chilla tilpasser seg enkelt barnets behov takket være justerbar setedybde og rygg høyde. Og hvis du trenger å justere sete- eller ryggbredde, kan du legge til hofte- og sidestøtter for en tettstående og sikker passform.

Tidlig intervensjon

Spedbarnsinnlegget for størrelse 1 gir støttet sittestilling for de aller minste. Dette er en del av tidlig intervensjon, og kan bidra til at barnets deltakelse i aktiviteter og sosial interaksjon med foreldre, omsorgspersoner og miljøet.

Trekk og puter

Putene til Chilla kommer i tre forskjellige farger: grå, rød og blå. Putealternativene kan også fås i mesh.



Bli bedre kjent med Chilla



Se video av Chilla




Tilbehør




Chilla sete

Str. 1, art nr.: 31881012
Str. 2, art nr.: 31881022

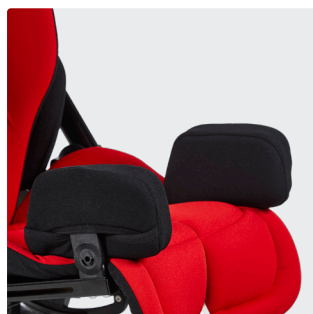

Utvendig knestøtte inkl. trekk,

Str. 1, sett, art nr.: 31881043-1
Str. 2, sett, art nr.: 31881043-2

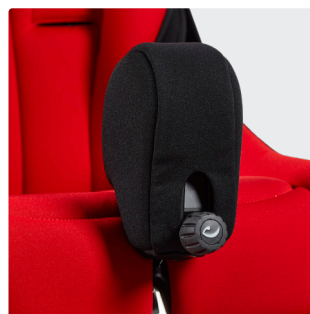

Abduksjonskloss med hurtigtutløsning, inkl. dekk

Str. 1, b6 l11,6 h19, hurtiglås inkl trekk art nr.: 31881044-1
Str. 2, b6 l16 h19, hurtiglås inkl trekk art nr.: 31881044-2



Lasteplate/medisinsk brett

Art. nr.: 31881095
For montering på ramme



Feste for oksygen-flaskeholder

Art.nr.: 31881096



Feste for IV-stativ

Art.nr.: 31881097



Ryggsekk

Art.nr.: 3187043183-2




Kurv

Art.nr.: 31881092
For montering på ramme



Spedbarnsinnlegg

Art.nr.: 31881001
Rosa, art nr.: 31881001-10
Lyseblå, art nr.: 31881001-20
Svart, art nr.: 31881001-80

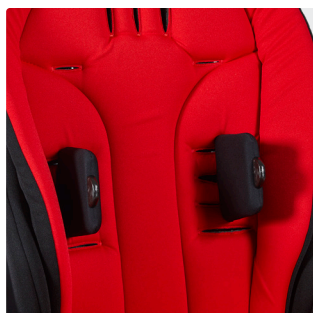

Sidestøtter

Str. 1, art nr.: 31881030-1
Str. 2, art nr.: 31881030-2



Festebrakett for kommunikasjonsutstyr

Art.nr.: 31881099



Gripebøyle inkl. trekk

Inkl trekk u/feste str 1, art nr.: 31881070-1
Inkl trekk u/feste str 2, art nr.: 31881070-2

Krever ytre knebeskyttelse eller festeanordning for grepstang og brett



Feste for gripebøyle og bord

Art.nr.: 31881060
Brukes når setet er uten ytre knebeskyttelse



Formet hodestøtte

Str. 1, art nr.: 31874084-1
Str. 2, art nr.: 31874084-2



Anatomisk hodestøtte inkl. støtte

Liten med feste, art nr.: 31874085-1
Medium med feste, art nr.: 31874085-2



Hodestøttepute

Buet b29 h13, str 1, art nr.: 31874082-1
Buet b31 h14, str 2, art. nt.: 31874082-2



Adapter for setefeste

Art nr.: 31881091
For montering av x;panda shape størrelse 1, x;panda størrelse 1, størrelse 2S og størrelse 2M



Kalesje, standard

Str. 1, art nr.: 31881080-10
Str. 2, art nr.: 31881080-20



Kalesje, premium

Str. 1, art nr.: 31881088-30
Str. 2, art nr.: 31881088-40




Bord modell Chilla

Artnr.:31881071




Kile for sete

Art.nr.: 318720405

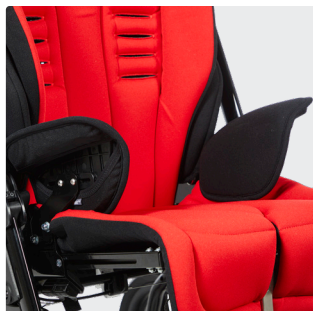

Faste hoftestøtter

Str. 1, art nr.: 31881023-1
Str. 2, art nr.: 31881023-2

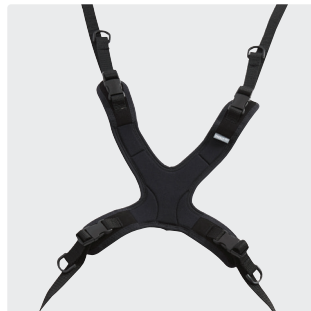

Belter og vester

Se tilbehørskategorien på nett

For mer tilbehør, se vår nettside



Møt Mathilde og hennes familie

På en nydelig dag i mai møtte vi Mathilde, moren hennes Chelina og hennes omsorgsfulle storebror Oliver på Naturcenter Hindsgavl og Naturresevat Hindsgavl i Middelfart, Danmark.

Mathilde er 4 år gammel og har dyskinetisk cerebral parese (CP). Hun fikk diagnosen da hun var to måneder gammel. Mathilde er nivå V, klassifisert ved hjelp av Gross Motor Function Classification System, og har derfor vanskeligheter med å spise, kommunisere, liten muskelkontroll og koordinering. Hun kommuniserer ved hjelp av lyder og ansiktsuttrykk, og hver gang broren Oliver nærmer seg henne, lyser hun opp i et stort smil.

Mathilde får opplæring hjemme av moren sin 37 timer i uken. Sammen med fysioterapeut samarbeider de om målsettinger for å sikre effektiv og målrettet trening.

Som familie liker de å besøke dyreparker og zoologiske hager. Chelina er erfaren med å finne steder som har god tilgjengelighet og fasiliteter for barn med nedsatt funksjonsevne. Spennende dyr, lukter og lekeplasser med husker tilpasset bruk med sittevogn eller rullestol, skaper en flott dagstur for hele familien.



I løpet av fritiden har Mathilde, Oliver og Chelina kastet seg ut i et nytt eventyr, nemlig camping på ulike steder rundt om i Danmark. Å dele et koselig rom i campingvognen, omgitt av lekeplasser og natur bidrar til en rekke sensoriske aktiviteter å utforske, og kvalitetstid som familie.

En skreddersydd løsning for Mathilde

Sammen med den anatomiske hodestøtten kan Chilla tiltes bakover for å hjelpe Mathilde med å kontrollere posisjonen på hodet sitt. Sidestøttene, torso-vesten, justerbare hoftestøtter og Y-hoftebeltet sikrer en stabil støttebase og optimal posisjon for overkroppen hennes. Ben og føtter kan posisjoneres optimalt med de ytre knebeskyttelsene, pommelen og fotstøtten.

Mathilde får full ernæring gjennom en PEG-sonde for å sikre trygg og tilstrekkelig ernæring. Hun har en egen pose med alle forsyningene til ernæringsslangen sin. Kroken på baksiden av R82 Chilla og kurven under gjør det enkelt å plassere forsyninger under vognen.

Kalesjen på Chilla gir Mathilde skygge og beskyttelse hvis det skulle regne. Vinduet i kalesjen gjør at Chelina kan holde et øye med Mathilde når kalesjen er i bruk.

Brettet gir Mathilde muligheten til å utvide støttebasen sin, armene plasseres på dette og hjelper til med å stabilisere overkroppen i setet.

Med gode justeringsmuligheter og et bredt spekter av alternativer hos Chilla, kan Mathilde kjenne den deilige følelsen av vinden i ansiktet og varmen fra solen, ta inn farger og lys fra omgivelsene, samt bli underholdt av brorens morsomme påfunn - samtidig som hun blir støttet i riktig sittestilling for optimal komfort.



Version: juni 2024. Reserving our rights for printer's error or discontinued products. Please find an updated edition on our website etac.no. All rights reserved.

Etac er en verdensledende utvikler av innovative hjelpemidler og utstyr for pasienthåndtering. Siden 1973 har vi jobbet for å forbedre livskvaliteten for den enkelte, familiemedlemmer og omsorgspersoner.

For informasjon om produktene og siste oppdateringer, besøk www.etac.no.