

etac[®]
Creating Possibilities



molift[®]

Molift Transfer Pro

Forbedret sittende forflytning – økt mobilitet

Molift Transfer Pro

En forflytning er mer enn bare en bevegelse – det er en viktig del av pasientens rehabilitering og vedlikehold av fysiske evner. Molift Transfer Pro gir et sunt og trygt grunnlag for både pasient og pleier.

For sittende forflytninger

Molift Transfer Pro skal brukes når pasienten kan reise seg for sittende forflytninger mellom eksempelvis seng, rullestol, toalett eller lignende. Pasienten bør være i stand til å følge instruksjer, løfte sin egen kroppsvekt mens de har god stabilitet i kjernemuskulaturen.

Dette er ganske enkelt ideelt for en rekke tilfeller som daglig finnes på sykehus, sykehjem og i private hjem.

Komfort og trygghet via god design

Ergonomisk grep over hele gripebøylen med flere muligheter for pasient og pleier, og godt med plass for å nå vaskeservanten. Dette sikrer et bredt bruksområde. Stabile og behagelige seteplater, samt myk knepute som sørger for at pasienten sitter trygt og godt under forflytningen.

Fotplaten har lav høyde og en skrå kant som gjør det lettere for å pasienten å plassere føttene. For pleier er det enkelt å justere bredden på bena, og utformingen av Transfer Pro gjør at den kommer tett innpå der pasienten sitter, som tilrettelegger for trygg forflytning. Sentralbremsen låser to hjul samtidig, med både visuell og lydmessig bekreftelse.

Tilbehør kan henges på siden gripebøylen – praktisk, enkelt og ute av veien for pasient og pleier.



Gripebøyle

Flere ergonomiske grep for pasient og pleier sikrer ergonomiske og komfortable plasseringer for hendene.



Sentralbrems

Intuitiv sentralbrems som låser begge hjul uavhengig av hvilken stilling de står i. Når hjulene låses kan man både se og høre at bremsen er aktivert.



Seteplater

De stabile seteplatene sørger for at pasienten får en komfortabel forflytning. Kantene gir et godt grep for den som skal folde platene opp og ned.



Lettrillende hjul

Kvalitetshjulene ruller lett, og gir enkel manøvrering. Det krever veldig lite kraft for å flytte Transfer Pro fra A til B.

Kliniske fordeler:

- Reduserer belastning og skader på pleier.
- Tilrettelegger for raskere rehabilitering.
- Trygge og behagelige forflytninger.
- Støtter brukeren til å utnytte egne fysiske evner.
- Frigjør en hånd for pleier.

Naturlig bevegelsesmønster

Dette handler om hvordan vi mennesker naturlig bruker kroppen gjennom dagen.

De naturlige bevegelsesmønstrene ligger i vår fysiologi, og har gjennom menneskets utvikling blitt formet til å gjennomføre ulike aktiviteter – som å reise seg opp og sette seg ned.

Transfer Pro støtter dette ved at brukeren kan lene seg fremover med føttene under seg for å komme opp i stående.



Scann QR-koden for å se en video med mer om Molift Transfer Pro.

Produkt	Artikkelnummer	Spesifikasjoner	
Molift Transfer Pro	16090300	Høyde	1179 mm
		Lengde	920 mm
		Bredden	669 mm
		Høyde fotplate	56 mm
		Svingradius med åpne/lukkede ben	1030/1146 mm
Brukerhøyde			
Minimum - Maksimum	1490-2000 mm		
Vekt			
Total vekt	28.2 kg		
Maks brukervekt (SWL)	200 kg		
Materialer			
Pulverlakkert aluminium, plast, stål og polyuretan-skum			

CE

Vask / desinfiser med rengjøringsmiddel med pH 5-9 eller desinfeksjonsmiddel 70 %.


Tilbehør



Molift Soft Handles 2 stk

Hjelper brukeren med å nå gripebøylen.

Molift Soft Handles82511

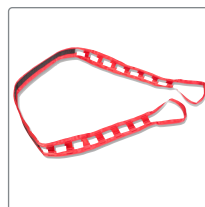

Molift Assist Strap

Sikkerhetsstropp for ekstra sikkerhet og støtte. Tilgjengelig i to størrelser: S/M og L/XL.


Molift Assist Strap S/M..... 82508
Molift Assist Strap L/XL..... 82509



Molift Assist Sleeve S/M

Belte med justerbart trekk som gjør det enklere for brukeren under oppreisning, samt støtter under forflytning.


Molift Assist Sleeve S/M..... 82528
Molift Assist Sleeve L/XL..... 82529

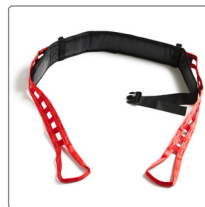

Molift Assist Belt

Belte med justerbart trekk og klipslås som gjør det enklere for brukeren under oppreisning, samt støtter under forflytning.

Molift Assist Belt S/M..... 82964
Molift Assist Belt L/XL..... 82965

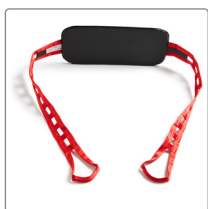

Molift Assist Sleeve Wide

Belte med justerbart trekk i størrelse L/XL for enklere for brukeren under oppreisning, samt støtter under forflytning.

Molift Assist Sleeve Wide 90301



IV-Pole

Høydejusterbar infusjonsstang som passer til Molift Transfer Pro.

IV-Pole1630030



O-Bracket

Brakett for trygg oppbevaring og transport av oksygentank.

O-Bracket1630040

Etac er en verdensledende utvikler og leverandør av ergonomiske hjelpemidler og pasienthåndteringsutstyr. Siden 1973 har vår ambisjon vært å tilby løsninger som optimaliserer livskvaliteten for individet, deres familie og pleiere.

Finn ut mer om våre produkter på www.etac.no

Etac

+47 815 69 469

hovedkontor.norge@etac.no

www.etac.no

etac[®]
Creating Possibilities