

# Harnais Molift

**molift**<sup>®</sup>  
by Etac

## Inspection périodique (FR)

Conformément à la norme ISO:10535

PI40007 Rév. A 2022-12-16

### Portée

L'inspection périodique doit être effectuée au moins tous les 6 mois.

Une inspection plus régulière peut être nécessaire si le harnais est utilisé ou lavé plus souvent que la normale. L'inspection doit être effectuée par un personnel qualifié. Utilisez cette liste de contrôle pour repérer les signes de dommages, d'usure ou de défaillance potentielle. Vérifiez que le harnais peut être utilisé en toute sécurité jusqu'à la prochaine inspection périodique. Le dossier d'inspection doit être conservé en toute sécurité pour être examiné en cas d'accident.



Détruisez et jetez les harnais endommagés et anciens qui ne passent pas l'inspection.

### Informations produit (utiliser la liste de la page suivante si plus d'un harnais) :

Modèle de harnais :

(Ex. RgoSling HighBack .....)

N° d'article :

.....

Taille :


XXS  XS  S  M  
 L  XL  XXL

N° de série :

.....

### Liste de contrôle

OK	Défaut	N/A	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>1. Étiquette du produit</b> Il est possible de lire : la charge maximale d'utilisation (CMU), le numéro d'article, le numéro de série, la taille, les symboles de lavage.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>2. Tissu</b> Pas de déchirures ou d'effilochures, de marques de brûlure, de trous, de variations de couleur, de mauvaises odeurs ou d'autres signes d'usure.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>3. Rembourrage</b> Pas de rétrécissement, de gonflement, de déformations ou de plis.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>4. Coutures</b> Pas de fils détendus ou de coutures/mailles endommagées.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>5. Sangles de levage et bande latérale</b> Pas de déchirures ou d'effilochures, d'étirements, de marques de brûlure ou d'autres signes d'usure.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>6. Poignées et poches de guidage</b> Pas de déchirure, d'effilochures ou de mailles détendues.
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<b>7. Détails</b> Les boucles autobloquantes, boucles ou anneaux ne présentent pas de dommages ou de fissures
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<b>8. Manuel d'utilisation</b> Le manuel d'utilisation est disponible (les manuels d'utilisation peuvent être téléchargés sur <a href="http://www.etac.com">www.etac.com</a> )

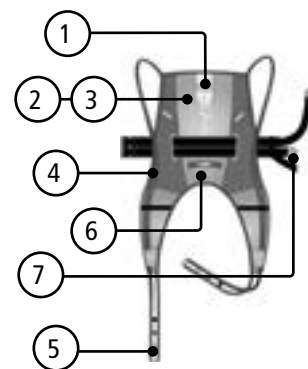

Etac A/S  
Parallevej 3  
DK-8751 Gedved  
[www.etac.com](http://www.etac.com)


# Approuvé par :

Vérifiez les 8 points de la liste de contrôle. Si l'un de ces points présente un défaut, l'utilisation du harnais n'est pas approuvée.

Date : .....

Nom de l'inspecteur :  
(Lettres majuscules) .....


Signature : .....

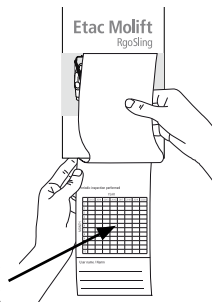

Utilisez un marqueur indélébile ou un perforateur pour marquer la date de l'inspection effectuée sur l'étiquette du harnais. La prochaine inspection doit être effectuée dans les 6 mois à compter de cette date.

## Liste d'informations sur le produit

Modèle de harnais : (Ex. RgoSling Toilet lowback)	N° d'article :	Taille :	N° de série :	OK	Pas OK
.....	.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
.....	.....	<input type="checkbox"/> XXS <input type="checkbox"/> XS <input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L <input type="checkbox"/> XL <input type="checkbox"/> XXL	.....	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>



Détruisez et jetez les harnais endommagés et anciens qui ne passent pas l'inspection.