

Produktark

Overmadrass Rhombo-Care Sky

Rhombo-Care Sky overmadrass er en skummadrass med hullperforering i skummet. De øverste 2 cm er i meget elastisk Rhombo Therm Sky-skum med slisser skåret i skummet, slik at madrassen tilpasser seg kroppens konturer. Hullene gir redusert spenning i overflaten, bedre trykkfordeling, og bidrar til at varme og fuktighet kan fordampe. Overmadrass øker liggekomforten på standard madrassene betraktelig. Overmadrassen skal brukes oppå en standard madrass. Strikk i hvert hjørne for feste på madrassen slik at overmadrassen ligger stabilt.

Bruksområder

Anbefales for liggende personer som:


- Har hatt trykksår
- Har risiko for å utvikle trykksår
- Har lavere til middels+ grad trykksår (sårgrad 1-3)
- Har lav til normal sensibilitet

Egenskaper


- Madrassen er perforert og leder effektivt bort fuktighet og varme
- God trykkfordeling
- Festestrikk i alle hjørner



**SÅRGRAD
I-III**

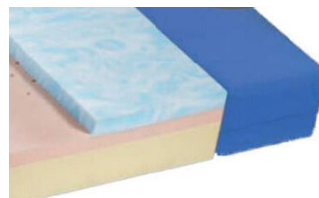

Øverste lag (lyseblått) er det elastiske Rhombo Therm Sky-skummet.

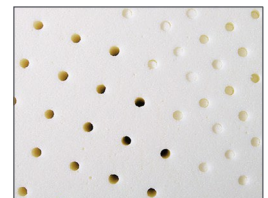

Hullperforering i skummet, nedre del

Beskrivelse	B x L (cm)	Art. nr.	Madrass	
Overmadrass Rhombo-Care Sky inkl. inkotrekk	90x200	3579148	Høyde	7 cm
Overmadrass Rhombo-Care Sky inkl. inkotrekk	90x220	3579166	Brukervekt	40-150 kg
Overmadrass Rhombo-Care Sky inkl. inkotrekk	85x200	3579155	Volumvekt	40kg/m
Overmadrass Rhombo-Care Sky inkl. inkotrekk	85x220	3579165	Fasthet (kPa/N)	3,0 kPa/125N
			Branntest	597-1, 597-2
			Inkontinenstrekk	
			100% polyester belagt med polyuretan	
			Glidelås på tre sider	
			Vaskes i maskin på opptil 95°. Kan autoklaveres.	