



## Golvunderrede Floor frame

Gör det möjligt för användaren att interagera med familj och jämnåriga på golv- och bordsnivå.


Golvunderredet Floor frame är ett tillbehör till R82 x:panda shape som gör att användaren kan placeras på golvnivå för att interagera och leka med familj och kompisar. Underredet kan tiltas i olika positioner med hjälp av benens vinkeljustering.

Floor frame har fem alternativ för positionering av benen - både på de främre och bakre benen, vilket ger möjlighet att tilta både framåt och bakåt.


Floor frame levereras även med långa ben, vilket tillsammans med x:panda shape ger en bra sittställning och optimal positionering av kropp, nacke och huvud när användaren sitter vid middagsbordet.




R82<sup>®</sup>

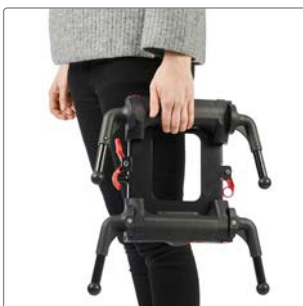

Lätt att transportera

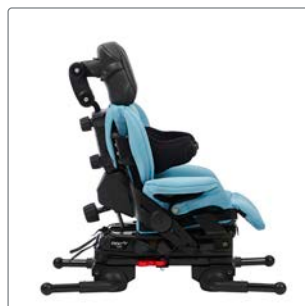

Låg höjd från golv till sits

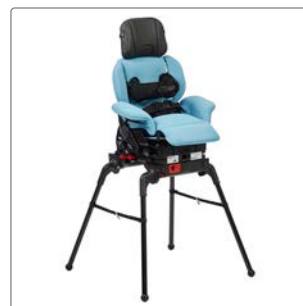

Långa ben



Flera olika tiltalternativ

## Egenskaper och funktioner

### Huvudstöd

Ett brett urval av huvudstöd inklusive ett nytt 3D-fäste och en bekväm böjd dyna. Ger många möjligheter till individuellt stöd vid vila eller aktivitet.

### Posturalt stöd

Bälte sidostöd som omsluter användaren eller ett vanligt sidostöd, som båda ger användaren posturalt stöd.

### Adapter

Adapter ingår i Floor frame, vilket gör det enkelt att montera sitsen. Adaptern gör det möjligt att montera både x:panda shape Infant seat, x:panda shape stl 1 och x:panda stl 1-2.

### Långa ben

Genom att använda Floor frame med långa ben ges möjlighet att använda sittsystemet i bordshöjd vid t.ex. middagsbordet.

### Inbyggt arm- och höftstöd

Justerbart stöd för armar och höfter ger extra stöd för användarens hållning.

### Dubbelt låssystem

Floor frame har ett dubbelt låssystem för att säkra benens position och förhindra oavsiktlig tiltning.

### Korta ben

Genom att använda korta ben på Floor frame får man möjlighet till flera tiltfunktioner samtidigt som användaren får stöd vid sittande på golvet.



För produktens avsedda ändamål, nyheter och produktinformation – besök [www.etac.se](http://www.etac.se)

Etac Sverige AB

☎ 0371-58 73 00

✉ [info@etac.se](mailto:info@etac.se)

🌐 [www.etac.se](http://www.etac.se)

**etac**®  
Creating Possibilities