



Molift Raiser Pro

Ergonomisch platform voor veilige
en actieve sta-op transfer

 **etac**[®]



Molift Raiser Pro

De Molift Raiser Pro, met al zijn eigenschappen, vermindert het risico op letsel of blessures van de cliënt en de verzorger met zijn proactieve, preventieve en ergonomische ontwerp. Het ontwerp zorgt tevens voor een eenvoudige, actieve en veilige transfer.

Natuurlijk bewegingspatroon

Molift Raiser Pro geeft de cliënt de mogelijkheid zijn eigen spierkracht te gebruiken tijdens de transfer. Het natuurlijke bewegingspatroon wordt gestimuleerd en het ergonomische ontwerp zorgt ervoor dat de cliënt zich veilig voelt. Molift Raiser Pro is eenvoudig in gebruik.

Transfer in kleine ruimte

Molift Raiser Pro is stabiel en kan om zijn eigen as draaien waardoor hij eenvoudig te manoeuvreren is, ideaal in kleine ruimtes. Molift Raiser Pro zorgt voor een veilige en actieve steun tijdens een korte transfer.

Geschikt voor alle zorginstellingen

Molift Raiser Pro helpt bij het revalideren van cliënten in een zorginstelling of tijdens een transfer. De cliënt kan zijn balans verbeteren bij het zitten en opstaan. Molift Raiser Pro biedt altijd een veilige ondersteuning.



Omschrijving

Molift Raiser Pro

Artikelnr.

16090204

Materiaal

Gepoedercoat aluminium, plastic, staal, chrome

Gewicht

| | |
|----------------------------|---------|
| Totaal gewicht | 10.7 kg |
| Basisplaat | 5.4 kg |
| Handgreep | 5.3 kg |
| Maximaal gebruikersgewicht | 170 kg |

Afmetingen

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Hoogte x Diepte x Breedte | 1200 x 630 x 540 mm |
| Instaphoogte | 35 mm |

Wasinstructie




Reinig met een zachte doek en een standaard schoonmaakmiddel zonder oplosmiddel-en. Zo nodig met 70% alcohol desinfecteren.
Kan ontsmet worden op maximaal 70°C gedurende 10 minuten.

Kenmerken




Veelzijdige handgreep

De handgreep voelt zacht aan en biedt een optimale, comfortabele en veelzijdige grip aan voor zowel de cliënt als de verzorger.

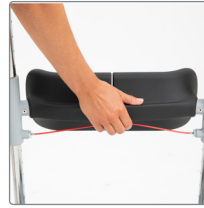

Eénhandige bediening

De kniesteun is eenvoudig met één hand te verstellen. De beensteun heeft een zachte en hygiënische vulling met zijdelingse ondersteuning en verdeelde kussens.

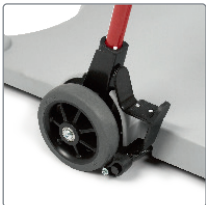

Centrale rem

Een centrale rem die zowel links als rechts te bedienen is voor de verzorger. Vergrendel de rem aan één voet, veilig en functioneel.



Lage instap

De basisplaat is slechts 3,5 cm hoog. Om de voeten juist te plaatsen zijn er zichtbare contouren met antislip op het oppervlak aanwezig.



Geschikt voor transfers in verschillende situaties



Ergonomisch platform

De ontwikkeling van de Molift Raiser Pro begon vanuit een ergonomische visie: "Hoe kunnen we de ergonomie voor zowel de cliënt als de verzorger verbeteren?"

De menselijke factor is van groot belang

Ergonomie is de wetenschap van ontwerpen fysiek bij de mens te passen in tegenstelling tot het dwingen van het menselijk lichaam om in het ontwerp te passen.



Eenvoudig bevestigen van de accessoires op de bevestigingspunten.

Verbeterde ergonomie

Succesvolle ergonomische producten zorgen voor een kleinere kans op verwondingen en lagere fysieke belasting.


Na evaluatie met cliënten en verzorgers bleek dat er verschillende productaanpassingen gedaan konden worden.

Molift Raiser Pro heeft een doordacht ergonomisch ontwerp tot in het kleinste detail. Zoals de kniesteun die op vele manieren zijn aangepast voor zowel de cliënt als de verzorger.



Ergonomie voor de verzorger

De hoogte kan eenvoudig worden aangepast. Met één hand op de kniesteun kan met de andere hand de hoogte eenvoudig worden versteld.

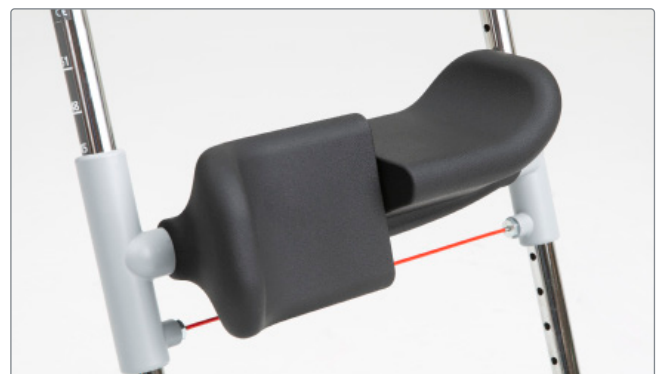

Ergonomie voor de cliënt

De kniesteun is zacht, comfortabel en volgt de beweging van zitten naar staan. Het biedt tevens een ondersteuning van de benen.

Kenmerken

Elk kleine detail op de Molift Raiser Pro biedt voordelen voor zowel de cliënt als de verzorger.

Ergonomische greep

De zachte handgreep biedt een optimale grip.

Bevestigingspunten

Maakt het eenvoudig om accessoires te bevestigen aan de zijkant van de handgreep

Eenvoudig schoonmaken

De polstering van de beensteun is eenvoudig schoon te maken

Verstellen kniesteun

Eenvoudig verstellen van de kniesteun op de juiste hoogte.

Gebogen zijde

De basisplaat heeft een gebogen zijde zodat de cliënt eenvoudig dicht bij het toilet kan komen.

Centrale rem

Vergrendel de rem eenvoudig aan één zijde.

Lage instap

De lage basisplaat van slechts 35 mm vergemakkelijkt een eenvoudige instap.

Totale breedte - 540mm

Geschikt voor kleine ruimtes met een totale breedte van 540mm





Een win-win situatie

Ongevallen gebeuren wanneer de verzorger een transfer verzorgt voor meerdere cliënten. Molift Raiser Pro is ontworpen om een win-win situatie te creëren. Het maakt gebruik van een natuurlijk bewegingspatroon en vermindert het risico op verwondingen van de verzorger. Een goede oplossing voor zowel de cliënt als de verzorger.



Vroeg mobiliseren

De cliënt kan met de Molift Raiser Pro vroeg beginnen met mobiliseren, zelfs op de intensive care van het ziekenhuis. Molift Raiser Pro wordt gebruikt voor de transfer van de ene zittende positie naar de andere. Het geeft de cliënt de mogelijkheid om dagelijks te oefenen om vaardigheden en kracht te verbeteren.

Het doordachte ergonomische ontwerp van Molift Raiser Pro maakt het de perfecte keuze voor korte actieve transfers in ziekenhuizen of instellingen.



Eenvoudig mee te nemen

Molift Raiser Pro basisplaat heeft een ingebouwde handgreep. Maak de twee knoppen los en hij is eenvoudig mee te nemen. De Molift Raiser Pro is zo smal mogelijk gemaakt om optimale toegankelijkheid te verkrijgen zonder in te leveren aan de stabiliteit.

Accessoires



Molift Handgriep-lussen

Dienen als verlenging van de handgreep en kunnen worden gebruikt wanneer de cliënt de handgreep niet kan bereiken.



Molift Heel Strap

Wanneer de cliënt zich bij het opstaan niet zeker voelt, ondersteunt de sling hem of haar van achteren.



Molift Sling met glijstuk

Middels de sling kan de cliënt ondersteunt worden tijdens het opstaan. Het glijstuk voorkomt opstropen van kleding.



Block

Het block kan gebruikt worden bij kleine volwassenen en kinderen.

Accessoires

Maat

Artikelnr.

| | | |
|---------------------------|-------|--------------------------|
| Molift Handgriep-lussen | 2 pcs | E82511 |
| Molift Sling | S/M | E82508 |
| Molift Sling | L/XL | E82509 |
| Molift Sling met glijstuk | S/M | E82528 (E82508 + E82537) |
| Molift Sling met glijstuk | L/XL | E82529 (E82509 + E82537) |
| Molift Raiser Belt | S/M | E82964 (E82508 + E82963) |
| Molift Raiser Belt | L/XL | E82965 (E82509 + E82963) |

Wasinstructie

Machinewas op 80 °C. Lag temperatuur, max. 50 °C, in de droger



Molift Sling met glijstuk vergemakkelijkt de verzorger om de cliënt te laten staan.



Molift Raiser Block wordt geplaatst voor personen met een kleiner postuur.



Samen op zoek naar de beste oplossing

Etac is één van 's werelds toonaangevende ontwikkelaars van ergonomische hulpmiddelen voor kinderen en volwassenen. Met onze verschillende productmerken bieden we kwalitatieve producten voor een breed scala aan dagelijkse behoeften en zorgomgevingen, voor alle levensfasen. Denk hierbij aan douche- en toiletvoorzieningen, zitkussens, rolstoelen, tilliften en transferhulpmiddelen. Samen met onze klant op zoek gaan naar de beste oplossing voor ieders persoonlijke situatie, dat is onze missie.

Kijk ook op www.etac.nl

Etac B.V.
Tinweg 8
8445 PD Heerenveen
T: 0513 681 686
E: contact.nl@etac.com
W: Etac.nl

 **etac**[®]
Creating Possibilities