



## S.P.A. kollektion

Sikker. Personlig. Assistance

 **etac**<sup>®</sup>




## Vi støtter dig. Vær dig selv.

For de fleste af os kommer der et tidspunkt – på grund af alder eller noget andet – hvor man har brug for ekstra støtte. Man er ikke lige så smidig, man bevæger sig måske ikke som før. Man tænker, at man skal opføre sig på en bestemt måde. Men sådan er det ikke.

**Etac S.P.A. Kollektion** består af *Rex armstøtte*, *Flex støttehåndtag* og *Relax brusebadestol*. Alle har hver sin unikke funktion men spiller sammen, for at dit badeværelse skal være så enkelt, pænt og sikkert som muligt. Det giver dig muligheden for at være dig selv.



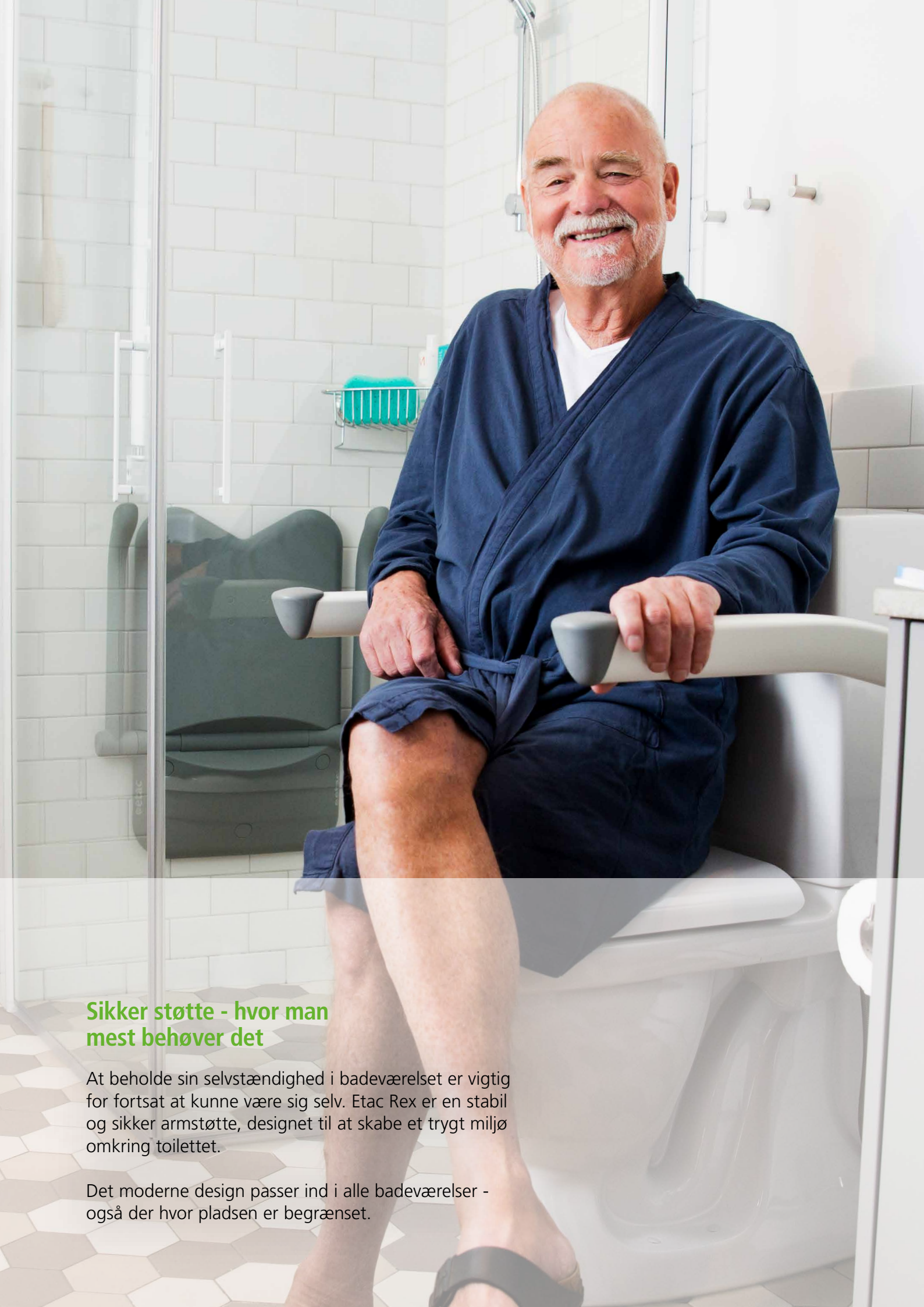

## Sikker støtte - hvor man mest behøver det

At beholde sin selvstændighed i badeværelset er vigtig for fortsat at kunne være sig selv. Etac Rex er en stabil og sikker armstøtte, designet til at skabe et trygt miljø omkring toilettet.

Det moderne design passer ind i alle badeværelser - også der hvor pladsen er begrænset.

# Etac Rex toiletarmlæn

*Sikrer miljøet omkring toilettet*

## Passer til alle badeværelser

Etac Rex er et stabilt og sikkert armlæn som giver dig tryghed ved toilettet. Det smarte design gør, at armlænet tager meget lidt plads, også når det er slået op. De ligger op ad væggen og er ikke i vejen. Og takket være den vinklede form så er de altid nemme at nå og få greb om. De er konstrueret så de kan foldes ned behageligt og smidigt.

Etac Rex er produceret i materiale af høj kvalitet, for at give et stabilt greb og sikker support når du mest har brug for det.

## Støtte designet til dig

Etac Rex fås i tre forskellige længder og kan bestilles med eller uden støtteben. Vælg en variant der passer dig, dit badeværelse og dine behov. Støttebenene øger den maksimale brugervægt til 150 kg.

Enkel montering på væggen og passer ind i alle badeværelsesmiljøer.



*Etac Rex fås i tre forskellige længder og i varianter med eller uden støtteben.*

### Etac Rex toiletarmlæn

- Toiletarmlæn Rex 60 cm
- Toiletarmlæn Rex 70 cm
- Toiletarmlæn Rex 70 cm med støtteben
- Toiletarmlæn Rex 85 cm
- Toiletarmlæn Rex 85 cm med støtteben

### HMI-nr.

- 102351
- 102352
  
- 102354
- 102353
  
- 102355

### Varenr.

- 81705010
- 81705020
  
- 81705030
- 81705040
  
- 81705050

**Materiale** Aluminium, polyurethan, ABS plastik, polypropylen.  
Støtteben: Aluminium, polyamid, TPE, rustfrit stål.

**Farve** Hvid med grå detaljer.

### Max. brugervægt


Etac Rex 60/70 cm: 135 kg  
Etac Rex 85 cm: 100 kg  
Med støtteben: 150 kg

### Vægt

60 cm: 2,7 kg  
70 cm: 2,9 kg  
85 cm: 3,3 kg  
Støtteben: 0,7 kg



Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/renses ved max. 85° om nødvendigt.

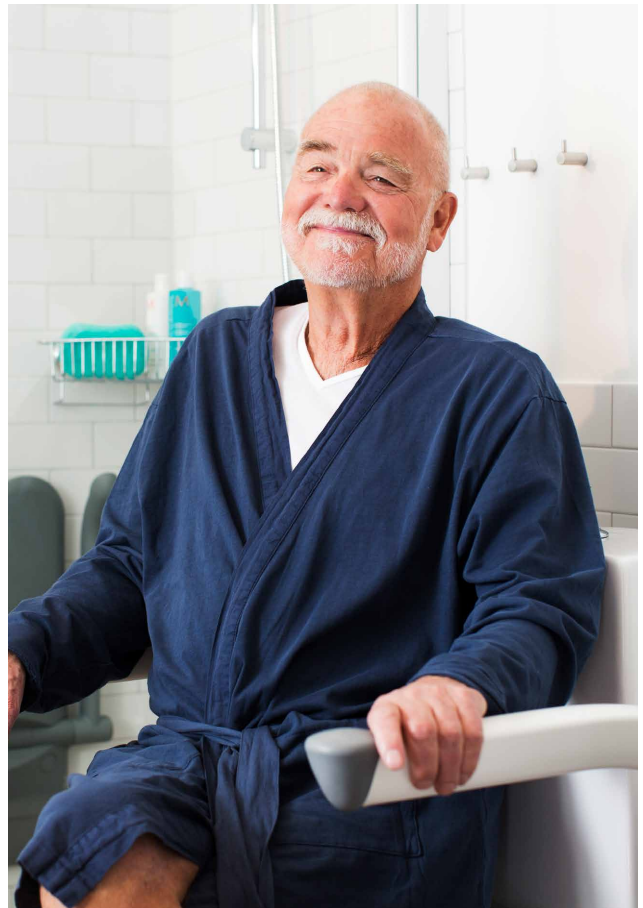

## Rex egenskaber



### Komfortabelt greb

Armlænets triangulære form giver et fast og naturligt greb.



### Nem at rengøre

Med rene, glatte overflader er armlænet både stilrent og nemt at rengøre.






### Sikker og stabil

Materiale og konstruktion af høj kvalitet giver sikkerhed når det behøves mest. Etac Rex fås også med støtteben, hvis ekstra stabilitet ønskes.



### Smart design

Armlænene tager meget lidt plads i opslået position, og den vinklede form gør det let at nå og slå ned igen.

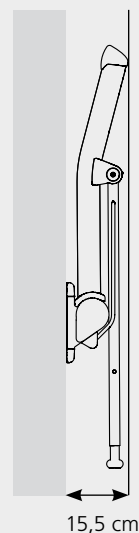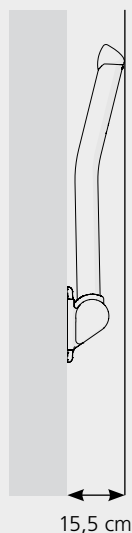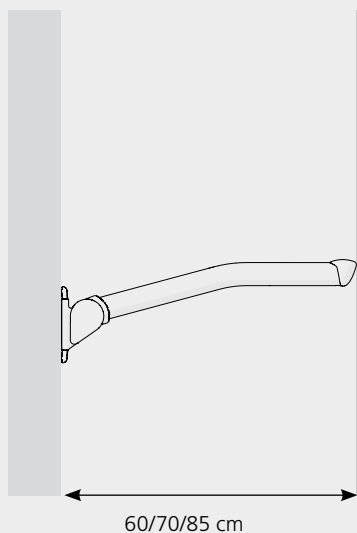

## Tilbehør



### Toiletpapirholder

Toiletpapirholder i rustfrit stål som fastgøres på armlænet

81706001



### Skruesæt

Skruer og rawplugs til montering i beton, krydsfiner eller træ.

T6S 8x80 DIN 571 A2

81706004



### Opbevaringskurv

Opbevaringskurv i polyester/mesh (fintvævet net) som fastgøres på armlænet.

81706003



## Flexibilitet og frihed

Etac Flex støttehåndtag er det perfekte valg, når du har brug for støtte i badeværelset. Med sit fleksible modulsystem er det enkelt at tilpasse støttehåndtagene på en måde, som passer både dig og dit badeværelsesmiljø.



# Etac Flex støttehåndtag

*Innovativt design der skaber muligheder*

## Lette at opsætte, og lette at bruge

Monter med skrue eller lim. Vælg det som passer bedst til dig og dit badeværelse. Det rene skandinaviske design er tilpasset dit badeværelse, og man kan vælge mellem 2 farver - hvid og grå.

## Trygt greb

Støtthåndtagets gennemtænkte form og overflade giver et stabilt greb, selvom hænderne er våde. Triangulær form og behageligt tommelfingergreb øger trygheden.



*Etac Flex passer perfekt ind i baderumsmiljøer.*

### Etac Flex monteret med skrue

- Flex 30 cm hvid
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) hvid
- \*Forlænger Flex 30 cm hvid
- Flex 30 cm grå
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) grå
- \*Forlænger Flex 30 cm grå

### HMI-nr.

102373  
102374  
102386

### Varenr.

81707110  
81707120  
81706110  
81707310  
81707320  
81706310

**Vægt** 0,35 kg per del

**Max. brugervægt** 100 kg

**Materiale** Polypropylen

**Farve** Hvid eller grå

### Etac Flex monteret med lim

- Flex 30 cm hvid
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) hvid
- \*Forlænger Flex 30 cm hvid
- Flex 30 cm grå
- Flex 60 cm (2 x 30 cm) grå
- \*Forlænger Flex 30 cm grå

### HMI-nr.

102379  
102380  
102388


### Varenr.

81707210  
81707220  
81706210  
81707410  
81707420  
81706410



Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/renses ved max. 85° om nødvendigt.

*\*For at tilføje et eller flere støtthåndtag til et 30 cm eller 60 cm i kombination, er det nødvendigt at bestille Etac Forlænger Flex.*

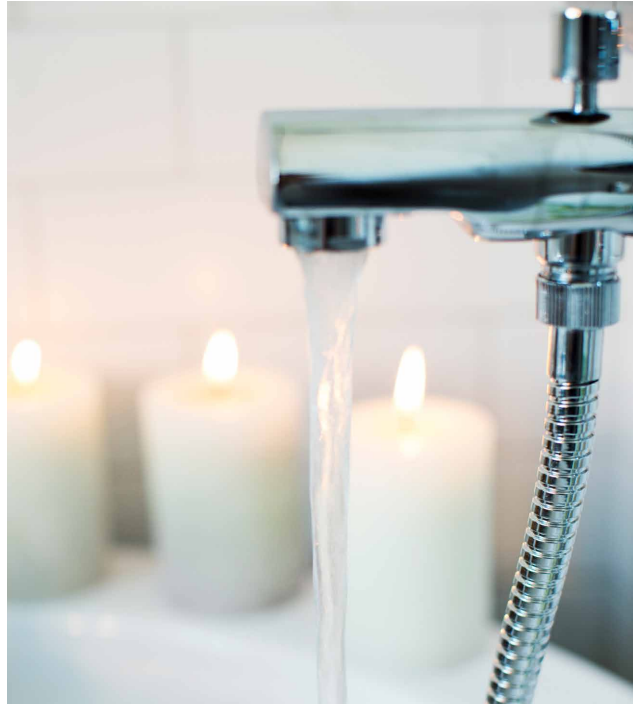


## Flex egenskaber



### Enkle at tilpasse

Modulsystemet opbygges enkelt i den længde og form, som passer dig og dit badeværelse.

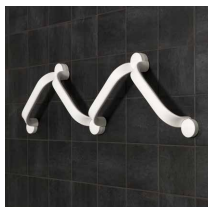

### Skaber muligheder

Du kan sætte så mange støttehåndtag sammen som du ønsker, og vælge de vinkler der passer dig. Det må om noget siges at skabe muligheder.




### Trygt greb

Støtتهåndtagets gennemtænkte form og overflade giver et stabilt greb, selvom hænderne er våde. Triangulær form og behageligt tommelfingergreb øger trygheden.



### Opsætning på to måder

Skrue eller lime. Lim er perfekt i de tilfælde, hvor du ikke kan eller vil bore i badeværelset.

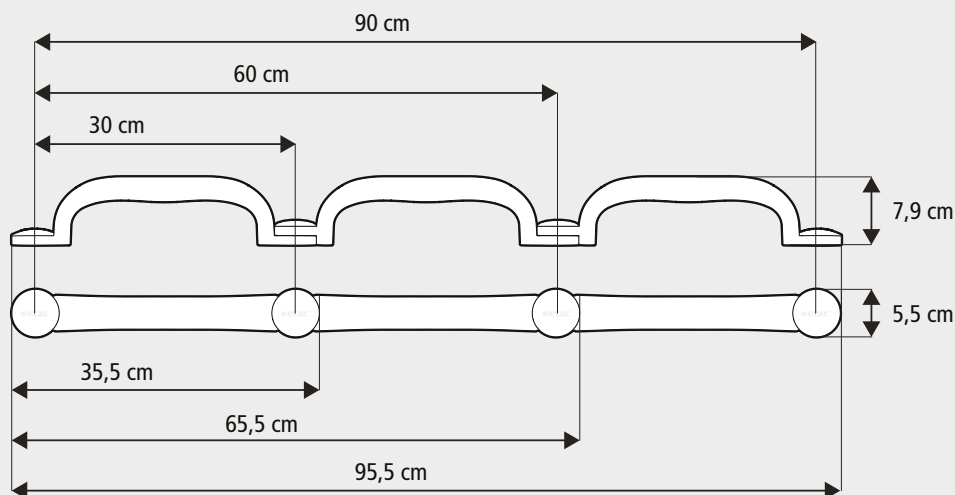

*Etac Flex et modulært fleksibelt system, som giver mange muligheder i forhold til positionering af støttehåndtagene. Vælg en vinkel imellem -90° til +90° efter dit behov.*





**Ingen unødvendig plads.  
Ingen unødvendig bekymring.**

Et brusebad er fantastisk og vi synes alle skal kunne nyde denne hverdagsluksus og samtidig være sig selv. Etac Relax er en vægmonteret brusebadestol, som kan monteres i de fleste badeværelser, uden at gå på kompromis med hverken sikkerhed eller komfort.

Altid tilgængelig, men ikke pladskrævende da sædet nemt kan foldes op.

# Etac Relax brusebadestol

Skandinavisk design til det moderne badeværelse

## Øje for detaljen

Etac Relax er udviklet til at muliggøre en tryk og fornøjelig badeoplevelse. Design, funktion og sikkerhed er meget vigtigt for os, og her præsenteres det i form af en diskret vægmonteret brusebadestol.

## Tilpasset til dig

Hvordan bevæger du dig i brusenichen, hvor meget støtte har du brug for, og hvilken variant passer bedst til dine behov? Etac Relax fås i 2 farver og 6 forskellige varianter - det betyder, at der fås en model, der passer lige til dig.



### Etac Relax brusebadestol

	HMI-nr.	Varenr.
- Relax hvid	83888	81703010
- Relax hvid, med armlæn	83889	81703020
- Relax hvid, med støtteben	83894	81703030
- Relax hvid, med armlæn og støtteben	83896	81703040
- Relax hvid, med armlæn og rygpude	83895	81703060
- Relax hvid, med armlæn, rygpude og støtteben	83897	81703050
- Relax grå	102356	81708000
- Relax grå med armlæn	102357	81708010
- Relax grå med støtteben	102358	81708020
- Relax grå med armlæn og støtteben	102359	81708030
- Relax grå med armlæn og rygpude	102361	81708050
- Relax grå med armlæn, rygpude og støtteben	102360	81708040

### Farve

hvid eller grå

### Max. brugervægt


Med støtteben: 150 kg  
Uden støtteben: 125 kg

### Materiale

Sæde: Polypropylen  
Armlæn: Polypropylen og TPE  
Ben: aluminium og rustfri stål  
Dupsko: TPE



Rengør produktet med et produkt uden opløsningsmidler (pH værdi 5-9) eller med et 70% desinfektionsmiddel. Kan dekontamineres/rensnes ved max. 85° om nødvendigt.

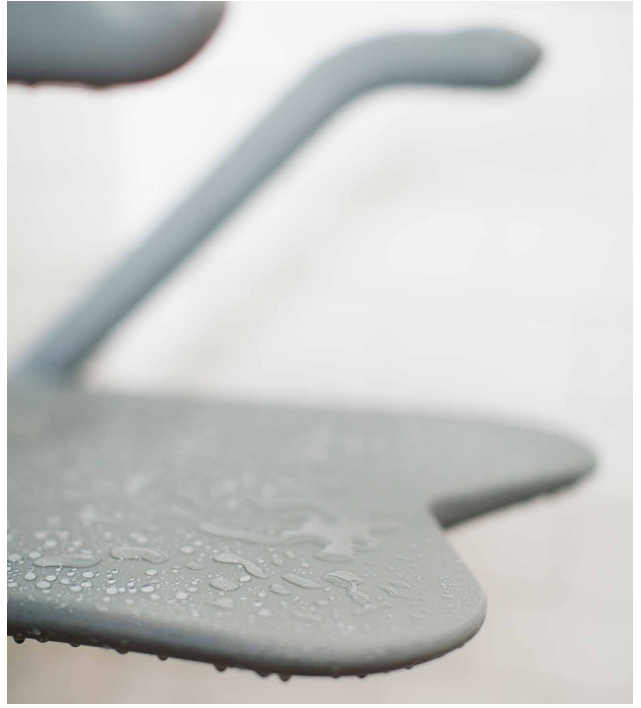

## Relax egenskaber



### Kompakt og pladsbesparende

Relax tilbyder en stor siddeflade trods små ydermål. I opslået tilstand måler den kun 8 cm fra væggen. Pæn nedslået såvel som opslået.



### Armlæn med sikkert greb

Ergonomisk formet armlæn med blød og skridsikker overflade. Designet for et sikkert greb og komfort.




### Funktionelt design

Sædets udformning tilbyder mange mulige siddepositioner, og gør sædet nemt tilgængeligt.



### Kun tre skruer i væggen

...og stolen er færdigmonteret (skruer medfølger ikke).

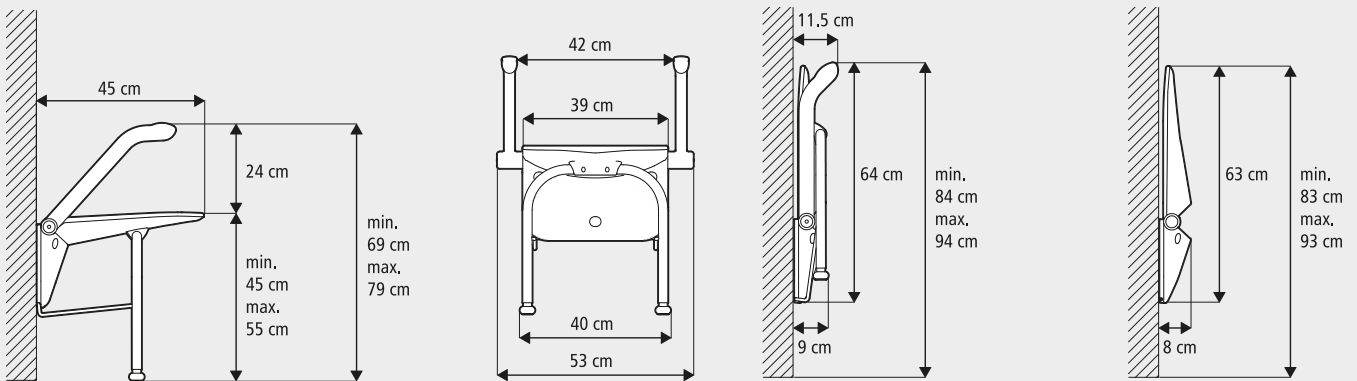

Skruer til montering medfølger ikke. Må kun monteres på vægge med tilstrækkelig vægtbæringsskapacitet. Montering skal foretages af kvalificeret person.

Find mere information i Etac Relax håndbogen på [www.etac.dk](http://www.etac.dk)

## Tilbehør



### Rygpude

Blød og varmereflekterende rygpude. Monteres let på væggen med selvklebende velcro. Farve: Hvid. 81704060




### Støtteben

For ekstra stabilitet til brugere op til 150 kg. Specialdesignede dupsko. Kan indstilles individuelt for optimal tilpasning til gulvets hældning. Hvid 81704050  
Grå 81708070



### Skruesæt

Skruer og rawplugs til montering i beton, krydsfiner eller træ. 84006130

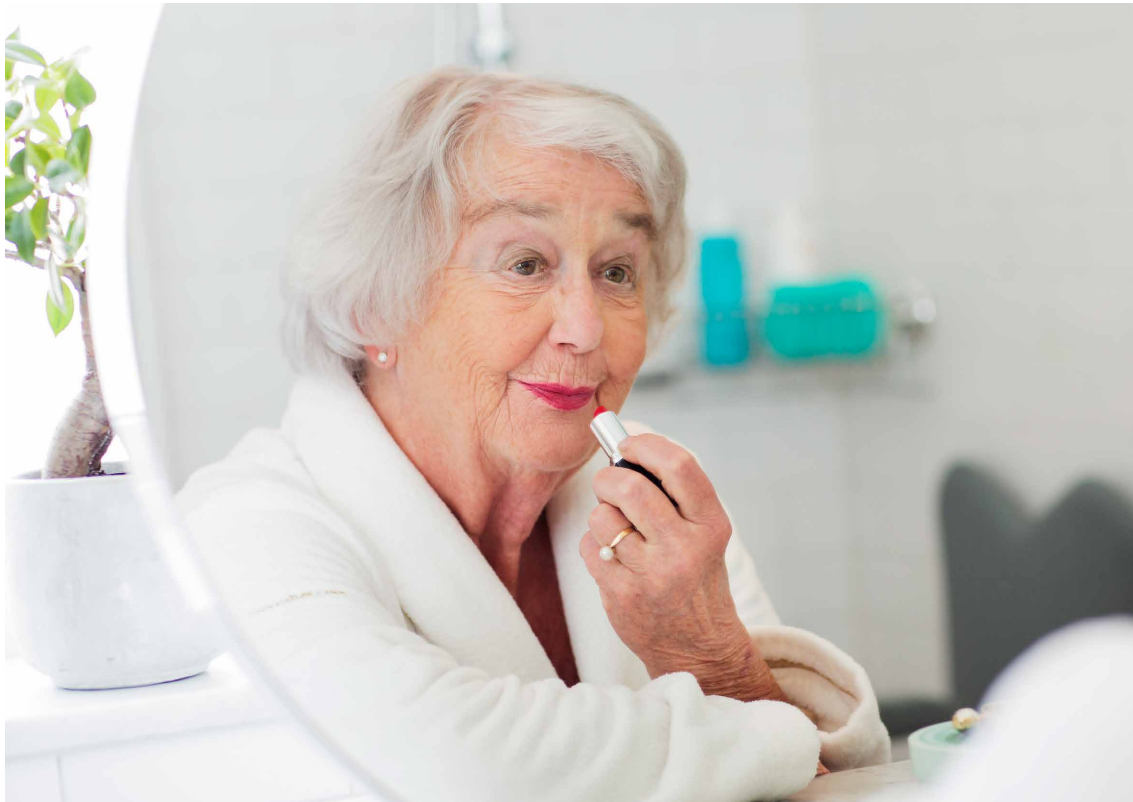

## Sikker. Personlig. Assistance.

*Etac S.P.A. Kollektion består af Rex toiletarm-læn, Flex støttehåndtag og Relax brusebadestol. Alle har sin unikke funktion, men spiller sammen for at gøre dit badeværelse funktionelt, behageligt, pænt og så sikkert som muligt. Og du skal fortsat kunne være dig selv.*

## Vi støtter dig. Vær dig selv.

*Besøg [etac.dk](http://etac.dk) for mere information eller kontakt os ved spørgsmål.*