

etac[®]

Creating Possibilities



etac[®]

Etac Swift Mobil-2

Mobile bade- og toiletstole

Vi introducerer Swift Mobil-2 familien

Etac Swift Mobil-2 bade- og toiletstole er lette at manøvrere og forenkler forflytning såvel som transport af brugeren til og fra badeværelset. De er designet til at gøre livet lettere for både brugeren og plejeren. Vi forstår, hvad der er vigtigt for plejere og brugere, og ved at lytte til vores kunder, forstår vi vigtigheden af let adgang, tilpasningsevne, værdighed og komfort.



Der er 5 års garanti på Swift Mobil-2 bade- og toiletstole, og de har en forventet brugslevetid på 10 år.

Tilgængelighed

Et flertal af plejere giver udtryk for, at ved personlig pleje af brugeren, er manglende tilgængelighed en udfordring, og ender ofte ud i anstrengte arbejdsstillinger. For at forbedre tilgængeligheden har sædet på Swift Mobil-2 åbning bagtil, samt god tilgængelighed både bagfra og fra siderne. Dette hjælper med til at gøre personlige hygiejnerutiner hurtigere at udføre, og mere værdigt for både bruger og plejer.

Flexibilitet og komfort

Alle Swift Mobil-2-modeller har en max. brugervægt på 160 kg og kan let tilpasses til mindre eller større brugere med forskellige udfordringer og behov. Stolene er justerbare på mange måder og har et bredt udvalg af tilbehør, der forbedrer komfort og stabilitet. Små justeringer kan gøre en stor forskel for sikkerhed og velvære for brugeren og arbejdsforholdene for plejeren.

Udforsk fordelene

Alle Swift Mobil-2 modellerne er funktionelle, fleksible og mobile bade- og toiletstole, designet til at lette personlig pleje for både plejeren og brugeren. Swift Mobil-2 tilbydes i tre forskellige modeller; en standard bade- og toiletstol, en tilt-model og en med 24" drivhjul.

Multi-justerbar hovedstøtte

Designet til at give maksimal komfort og fleksibilitet. Den kan justeres for at opfylde individuelle behov for brugeren. En Opret hovedstøtte er også tilgængelig.



Etac Swift Mobil-2



Etac Swift Mobil 24"-2 (leveres med fodstøtter som vist nedenfor).

Komfortabelt ryglæn

Justerbart og hurtigtørrende. Stabil pasform med to fastgørelsespunkter omkring kørebøjlen. En fast, aftørbar ryg er også tilgængelig.

Fleksible armlæn

Justerbar i højde og bredde.

Bekvem tilgængelighed

Sæde med åbning bagtil, fordybning fortil og god tilgængelighed både bagfra og fra siderne.

"Etac Easy-Clean"

En unik overflade specielt udviklet til Etac. En perfekt balance mellem friktion og renlighed, skridsikkerhed og hygiejne!

Højdejusterbar

Nem at indstille til forskellige sædehøjder, uden brug af værktøj.

Bækken

Swift Mobil-2 og Swift Mobil Tilt-2 leveres inkl. bækken med låg.

Swift Mobil Tilt-2



Fodstøtte

Svingbare og aftagelige fodstøtter. Hælremme leveres som standardudstyr på Swift Mobil Tilt-2. Kan tilkøbes som ekstra udstyr til de andre Swift Mobil-2 modeller.

Etac Swift Mobil-2

Swift Mobil-2 er en fleksibel bade- og toiletstol, som giver de bedste muligheder for personlig pleje og komfort. Det brede tilbehørsprogram betyder, at Swift Mobil er meget fleksibel og nem at tilpasse til den enkelte brugers behov.

Sæde med god tilgængelighed

Sædet har åbning bagtil, hvilket giver hjælperen nem adgang til at assistere ved personlig pleje. Sædets overflade har "Etac Easy Clean" mønster, som giver en perfekt balance imellem friktion og rengøringsvenlighed.

Komfortabel aflastning

Den bløde rygpolstring, som tørrer hurtigt, har indbyggede stropper, som gør det muligt at indstille ryggen optimalt til den enkelte bruger. For støtte og komfortabel aflastning til de ekstra følsomme brugere, anbefaler vi de bløde sæder, som fås som tilbehør.

Nem og fleksibel tilpasning

Swift Mobil-2 har en maksimum brugervægt på 160 kg som standard, og den kan let højdejusteres fra 45 til 60 cm uden brug af værktøj. Armlænene kan justeres i højde og bredde. Swing-away fodstøtterne er højdejusterbare og fås også i en kort version, som f.eks. kan anvendes i kombination med et højere, blødt sæde.

Swift Mobil-2 XL

Til større brugere fås en XL-model, hvor rygrammen er 6 cm bredere.



Etac Swift Mobil-2

Swift Mobil-2

inkl. ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder, bækken med læg, opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter og 4 låsbare hjul.

HMI-nr.

118816

Varenr.

80229463

Vægt og dimensioner

16,6 kg. Total bredde: 58/64 cm (regulerbar). Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm (regulerbar).

Etac Swift Mobil-2 XL

Swift Mobil-2 XL

inkl. ryglæn, sæde, armlæn, svingbare og aftagelige fodstøtter og 4 låsbare hjul.

HMI-nr.

128787

Varenr.

80229483

Vægt og dimensioner

16,6 kg. Total bredde: 61/64/70 cm (regulerbar). Bredde mellem armlæn: 48/54/60 cm (regulerbar).

Etac Swift Mobil-2 med opret ryg

Swift Mobil-2 med opret ryg

inkl. ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder, svingbare og aftagelige fodstøtter, 4 låsbare hjul

HMI-nr.

135042

Varenr.

80229489

Vægt og dimensioner

16,6 kg. Total bredde: 58/64 cm (regulerbar). Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm (regulerbar).


Materialer

Stel: pulverlakeret stål.
Sæde/Armlæn: polypropylen.
Ryglæn: polyester/velcro.
Fodstøtte: polypropylen.
Hjul: polyamid/TPE, låsbare, kugleleje.



Max brugervægt: 160 kg.

Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel med en pH mellem 6 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning. Produktet kan rengøres sikkert i Autoklave ved 85°C i 3 minutter.

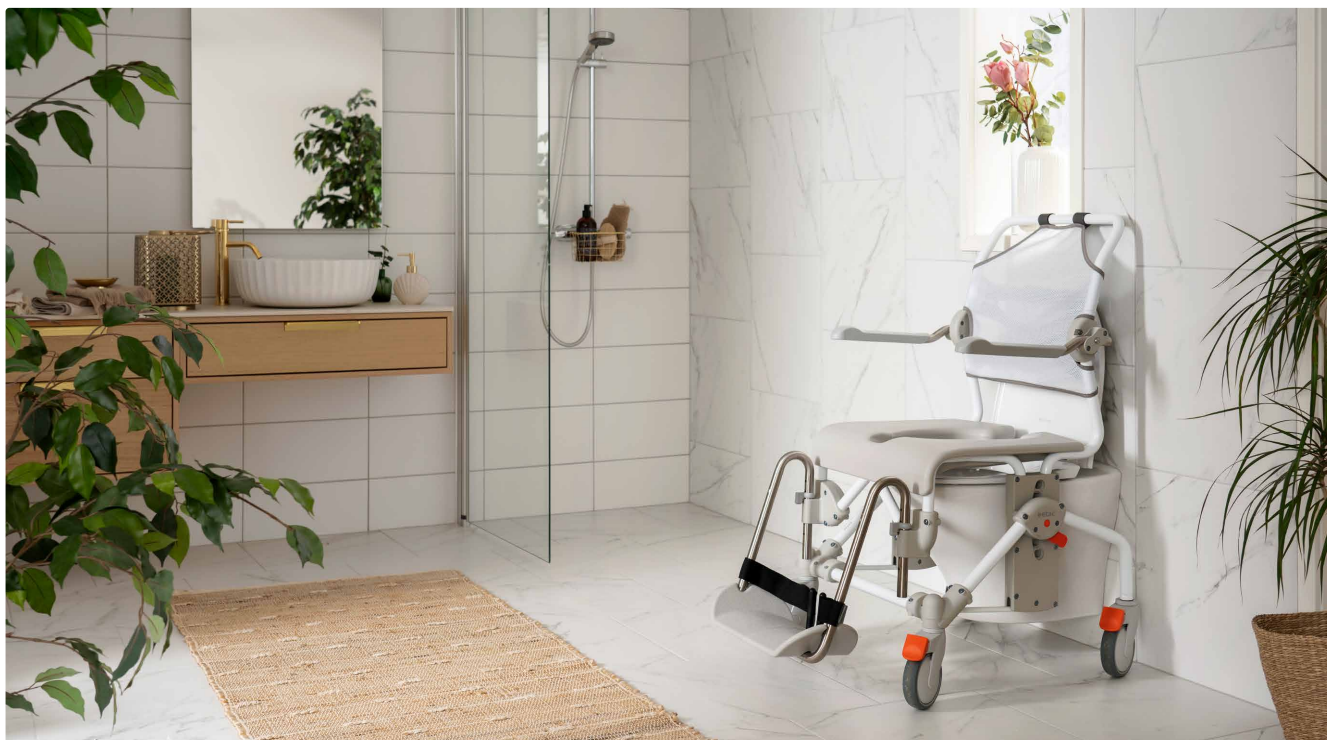

Etac Swift Mobil-2 med opret ryg, perfekt til væghængte toiletter

Etac Swift Mobil-2 er yderst velegnet til brug over almindelige toiletter, men ved visse typer af væghængte toiletter bliver toiletstolen placeret for langt fremme i forhold til toilettets åbning idet ryggen/kørebøjlen går mod væggen.

Med Swift Mobil-2 med opret ryg, evt. i kombination med en Opret hovedstøtte, kommer stolen 7 cm tættere på væggen og passer dermed perfekt over væghængte toiletter. Den oprette ryg kan også tilkøbes som tilbehør.

Egenskaber




Sæde med åbning bagtil

Giver nem adgang for personlig pleje, og komfort for brugeren. Den unikke overflade, specielt udviklet til Etac, har den perfekte balance mellem friktion og rengøringsvenlighed, skridsikker og hygiejnisk!



Justerbart ryglæn

Nem at tilpasse i forhold til brugerens figur, kropsholdning og behov for komfort. Rygbetrækket er fastgjort med 2 stropper omkring kørebøjlen for ekstra nem justering af hovedstøtte. Blødt og hurtigtørrende materiale.

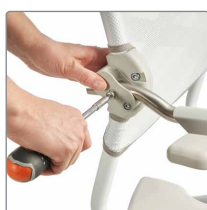

Justerbare armlæn som standard

Nem tilpasning i forhold til forskellige brugeres behov. Armlæne på Swift Mobil-2 og Tilt-2 kan justeres 6 cm i højden og bredden. Armlæne på XL-modellerne kan justeres 6 cm i højden og 12 cm i bredden.



Opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter

Fodpladerne kan klappes op og indstilles i vinkel, hvilket sikrer optimal understøttelse af fødderne. Nem indstilling af fodstøtten i forhold til underbenslængde. Ekskl. hælleme.

Bemærk at Swift Mobil-2 Standard og Swift Mobil-2 med opret ryg er udstyret med opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter (80209446). Swift Mobil-2 XL er med svingbare og aftagelige fodstøtter (84001302).

Etac Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil Tilt-2 er designet med ekstra meget fokus på plejeren og brugeren. Med tiltbar sædeenhed lettes de mange udfordringer, som plejepersonalet står overfor i deres daglige arbejde, og giver samtidig den komfort og sikkerhed, brugerne har brug for, for at føle sig godt tilpas.

Tilt funktion

Swift Mobil Tilt-2 har en brugervenlig tiltfunktion, der giver øget sikkerhed for brugeren og en ergonomisk arbejdsstilling for plejeren. Tiltfunktionen (- 5° til +35°) kan betjenes fra begge sider af stolen. Dette gør det nemt for plejeren at berolige og støtte brugeren, når han/hun vipes.

God tilgængelighed og komfort

Med god tilgængelighed rundt om sædeområdet gøres rutinerne for personlig pleje lettere. For følsomme brugere anbefales ekstra bløde sædehynder. Det bløde og hurtigtørrende ryglæn og fodstøtterne giver brugeren en god komfort.

Passer mange brugere

Grundet disse features kan bade- og toiletstolen tilpasses mange brugerbehov og -størrelser: Maksimal brugervægt på hele 160 kg, højdejusterbar 50-65 cm (sæde-til-gulv), armlænene kan justeres i højde og bredde, og den højdejusterbare, svingbare fodstøtte tilbydes også i en kortere version.



Swift Mobil Tilt-2 XL

Til større brugere fås en XL-model, hvor rygrammen er 6 cm bredere og fodstøtterne 12 cm bredere.

Etac Swift Mobil Tilt-2

Swift Mobil Tilt-2

inkl. Hovedstøtte, ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder, bækken med låg, opklappelige fodstøtter, hælrem og 4 låsbare hjul.

HMI-nr.

118817

Varenr.

80229473

Materialer

Stel: pulverlakeret stål.
Sæde/Armlæn: polypropylen.
ryglæn: polyester/velcro.
Fodstøtte: polypropylen.
Hjul: polyamid/TPE, låsbare, kugleleje.

Vægt og dimensioner

20,4 kg. Total bredde: 58/64 cm (regulerbar).
Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm (regulerbar).



max 160 kg
max 353 lbs



Etac Swift Mobil Tilt-2 XL

Swift Mobil Tilt-2 XL

inkl. Hovedstøtte, ryglæn, sæde, armlæn, svingbare og aftagelige fodstøtter, hælrem og 4 låsbare hjul.

HMI-nr.

128788

Varenr.

80229481

Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden silbemiddel med en pH mellem 6 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning.
Produktet kan rengøres sikkert i Autoklave ved 85°C i 3 minutter.

Max brugervægt: 160 kg.

Vægt og dimensioner

20,4 kg. Total bredde: 61/64/70 cm (regulerbar).
Bredde mellem armlæn: 48/54/60 cm (regulerbar).

Egenskaber




Sæde med åbning bagtil

Giver nem adgang for personlig pleje, og komfort for brugeren. Den unikke overflade, specielt udviklet til Etac, har den perfekte balance mellem friktion og rengøringsvenlighed, skridsikker og hygiejnisk!



Sikker tiltfunktion

Tiltfunktionen kan betjenes fra begge sider af stolen, hvilket muliggør en god arbejdsstilling for plejeren og tryghed for brugeren.

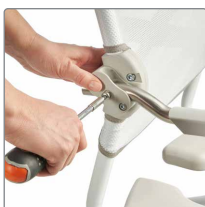

Justerbare armlæn som standard

Nem tilpasning i forhold til forskellige brugeres behov. Armlænene på Swift Mobil-2 og Tilt-2 kan justeres 6 cm i højden og bredden. Armlænene på XL-modellerne kan justeres 6 cm i højden og 12 cm i bredden.



Multi-justerbar hovedstøtte

Hovedstøtten er designet til at give maksimal komfort og fleksibilitet og kan justeres, så den passer mange brugerbehov.



Etac Swift Mobil 24"-2

Etac Swift Mobil 24"-2 er en version med drivhjul, designet til den selvhjulpne bruger.

Nem at manøvrere

Denne bade- og toiletstol er enkel at bruge og let at manøvrere. Baghjulene er placeret for maksimal kontrol og er lette at nå. De opklappelige armlæn og god plads foran drivhjulene, samt sædets facon, letter forflytninger til og fra stolen.

Komfortabelt sæde

For bedre tilgængelighed ved personlig pleje, er sædet åbnet bagtil og har en fordykning fortil. Sædet er designet til at give komfort uanset brugernes siddestilling eller bækkenbredde. For yderligere komfort fås ergonomiske og bløde sæder (tilbehør).

Imødekommer mange behov

Grundet disse features kan Swift Mobil 24"-2 tilpasses mange brugerbehov og -størrelser: Maksimal brugervægt på hele 160 kg, højdejusterbar 45-60 cm (sæde-til-gulv), armlæne kan justeres i højde og bredde, og den bløde og justerbare ryg kan justeres og tilpasses for bedst mulig positionering og komfort.

For større brugere tilbydes en ekstra bred XL ryggramme, der giver yderligere 6 cm mellem armlæne og 12 cm ekstra mellem fodstøtterne.



OBS! I Danmark leveres Swift Mobil 24"-2 med disse svingbare og aftagelige fodstøtter. Ekskl. hælrer.

Etac Swift Mobil 24"-2

Etac Swift Mobil 24"-2
inkl. Ryglæn, sæde, armlæn, bækkenholder,
opklappelige fodstøtter, 2 låsbare forhjul,
2 drivhjul og bremser.

HMI-nr.

118818

Varenr.

80229464

Vægt

25,1 kg

Dimensioner

Total bredde: 74 cm

Bredde mellem armlæn: 42/48/54 cm (regulerbar)

Materialer

Stel: pulverlakeret stål
Sæde/Armlæn: polypropylen
ryglæn: polyester/velcro
Fodstøtte: polypropylen
Hjul: polyamid/TPE, låsbare, kugleleje
Drivhjul: massive dæk, polyamid, kugleleje
Bremser: polyamid, rustfrit stål



max 160 kg
max 353 lbs



Rengør / desinficer produktet med et standardrengøringsmiddel uden slibemiddel med en pH mellem 6 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning. Produktet kan rengøres sikkert i Autoklave ved 85°C i 3 minutter.

Max brugervægt: 160 kg.

Egenskaber



Nem at manøvrere

Drivhjulenes position gør den nemt for brugeren at køre stolen. Drivhjulenes placering giver samtidig god plads foran stolen, hvilket letter forflytninger til og fra stolen.



Justerbar sædehøjde

Swift Mobil 24"-2 kan nemt indstilles i forskellige sædehøjder. Justeringer foretages endda uden brug af værktøj.



Justerbart ryglæn

Nem at tilpasse i forhold til brugerens figur, kropsholdning og behov for komfort. Rygbetrækket er fastgjort med 2 stropper omkring kørebøjlen for ekstra nem justering af hovedstøtte. Blødt og hurtigtørrende materiale.



Opklappelige og vinkeljusterbare fodstøtter

Fodpladerne kan klappes op og indstilles i vinkel, hvilket sikrer optimal understøttelse af fødderne. Nem indstilling af fodstøtten i forhold til underbenslængde. Ekskl. hælremme.



Tilbehør



Sæde uden åbning bagtil

Varenr. 84001337
Designet med en fordybning foran.
Materiale: Polypropylen.



Blødt Komfortsæde, 4 cm åbning bagtil

Varenr. 80209519
Den ergonomiske form og betydelige blødhed giver behagelig lindring og støtte. Designet med en fordybning foran.
Materiale: Polyurethan.



Blødt Komfortsæde, 2 cm åbning bagtil

Varenr. 80209518
Den ergonomiske form og betydelige blødhed giver behagelig lindring og støtte. Designet med en fordybning foran.
Materiale: Polyurethan.



Blødt Komfortsæde, 4 cm

Varenr. 80209507 (Lille åbning 15 cm)
Varenr. 80209506 (Stor åbning 18 cm)
Blødt og ergonomisk formet sæde med en fordybning foran. Sædet er min. 4 cm tykt.
Materiale: Polyurethan.




Blødt Komfortsæde, 2 cm

Varenr. 80209306
Åbning 18 cm. Blødt og ergonomisk formet sæde med en fordybning foran. Sædet er min. 2 cm tykt.
Materiale: Polyurethan.



Blødt sæde uden åbning

Varenr. 80209434
Et komfortabelt lukket sæde som dækker hygiejneudskæringen. Kan benyttes i badet.
Tykkelse 2 cm.
Materiale: Polyurethan.

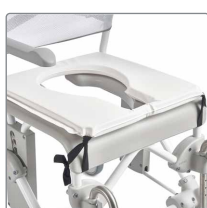

Blød sædepude med standard åbning

Varenr. 80209065
Skumpude med betræk af vandafvisende stof. Tykkelse 2 cm.
Materiale: Polyester/plastikbelagt.




Blød sædepude med oval åbning

Varenr. 80209067
Skumpude med betræk af vandafvisende stof. Tykkelse 4 cm.
Materiale: Polyester/plastikbelagt.



Hovedstøtte

Varenr. 80209521
Multijusterbar hovedstøtte med buetformet pude. Justerbar i højde, dybde, sideværts og i vinkel. Leveres komplet.
Materiale pude: Polyurethan
Materiale monteringsstang: Rustfrit stål.

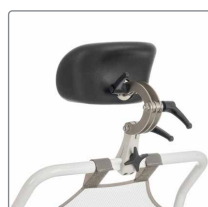

Opret hovedstøtte

Stolen kan komme tættere på væggen i kombination med Opret ryg. Hovedstøtten er multijusterbar med formet pude. Leveres komplet.
Materiale pude: Polyurethan
Materiale monteringsstang: Rustfrit stål.



Komfort kit

Varenr. 80209457
Inkluderer både komfortsæde med standard-åbning på 18 cm og komfortryglæn.



Komfort rygovertæk

Varenr. 80209455
Blød ryg med integrerede armlænsputer. Giver en varm og blød støtte. Håndtaget på armlænet dækkes ikke af overtrækket for bedre greb, når bruger skal rejse sig.
Materiale: Polyethylen.



Sidestøtter

Varenr. 80209509
Blødt rygstykke med sidestøtter.
Materiale: Polyester stof, velcro, polyethylen.



XL-ryg

Varenr. 80209454
Giver mere plads til skuldre og ryg hos den større bruger. Bredden mellem armlænene Bredden mellem armlænene øges 6 cm til totalbredde 48/54/60.
(Passer ikke til Swift Mobil Tilt-2).
Materiale: Polyester, pulverlakeret stål, rustfrit stål, polypropylen.

Tilbehør



Opret ryg

Varenr. 80209529
 Passer optimalt til væghængte toiletter, da stolen kan placeres 7 cm tættere på væggen sammenlignet med en standard ryg. (Passer ikke til Swift Mobil Tilt-2).
 Materiale: Samme som ved XL-ryggen.



Lås til armlæn

Varenr. 80209445
 Låsefunktion til armlæn fastlåser armlænet i enten op- eller nedslået position.
 Materiale: Rustfrit stål.



Fast ryg, aftørbar

Varenr. 80209530
 Justerbar i højden og let fleksibel i den nederste del. Nem at rengøre, vedligeholde og montere.
 Materiale: Polypropylen.



Hoftebælte

Varenr. 80209440
 Nem at justere med plastikspændet. Monteres omkring rygstrøjerne med velcrostropper.
 Materiale: Polyester



Tværlås

Varenr. 80303034 (60,5 cm)
 Varenr. 80209452 (66,5 cm)
 Fastgøres til armlænene.
 Materiale: Aluminium, polyethylen.



Brystbælte

Varenr. 80209442
 Let at justere. Fastgøres omkring stropperne på rygstøttestrøringen. Samtidig brug af hoftebælte anbefales.
 Materiale: Polyester.



Blød rygpude

Varenr. 80209448
 Giver brugeren varme og blødhed. Denne rygpude fastgøres ikke på armlænene, så disse fortsat kan slås op for at give god plads til sideværts forflytning.
 Materiale: Polyethylen.



Hofte-/brystbælte (polstret)

Varenr. 80209524
 Todelt bælte, der kan bruges enten som hofte- eller brystbælte. Justerbart med 3 spænder, længde 65-130 cm. Materialet er behageligt og hurtigtørrende.



Urinfanger

Varenr. 80209430
 En blød urinfanger, som er nem at montere og afmontere.
 Materiale: Polyurethan.



Spand med håndtag og låg

Varenr. 80209265
 Traditionel spand som benyttes med ovenstående spandeholder.
 Materiale: Polypropylen.



Armlænsputer

Varenr. 80209508
 Armlænsputerne udgør et varmt og blødt underlag og støtte for armene. Håndtaget på armlænet dækkes ikke af puderne for bedre greb, når bruger skal rejse sig. Sælges parvis.
 Materiale: Polyethylen.



Spandeholder

Varenr. 80209258
 Benyttes ved montering af spand eller bækken med høj kant. Der skal benyttes monteringsbeslag, som bestilles separat.
 Materiale: Polypropylen.



Hemiplegiarmlæn

Varenr. 80209035
 Den konturerede form giver støtte til brugerens underarm. Varmereflekterende materiale. Passer både til venstre og højre armlæn.
 Materiale: Polyethylen.



Bækken med låg og håndtag

Varenr. 80209255
 Designet form, der modvirker stænk. Låget har et håndtag, der låses fast på bækkenet og sikrer, at indholdet ikke spilder.
 Materiale: Polypropylen.

Tilbehør



Bækken

Varenr. 80209254 (Bækken uden låg)
 Varenr. 80209256 (låg med håndtag)
 Designet form, der modvirker stænk. Låget har et håndtag, der låses fast på bækkenet og sikrer, at indholdet ikke spilder.
 Materiale: Polypropylen.



Tipsikring Swift Mobil-2

Varenr. 80209439 (inkl. fæste)
 Varenr. 80209438 (ekskl. fæste)
 Minimerer risikoen for at stolen tipper bagover.
 Materiale: Polypropylen og Aluminium.



Bækkenholder

Varenr. 80209257
 Passer til Etac bækken og andre traditionelle hospitalsbækkener. Monteringsbeslag bestilles separat, se nedenfor.
 Materiale: Polypropylen.



Tipsikring, fremadvendt

Varenr. 80209526
 Tages i brug, hvis der er stor vægtbelastning foran på stolen. F.eks. ved bruger med ben lagt i gibs etc.



Monteringsbeslag

Varenr. 80209435
 Monteres under sædet, hvilket gør det muligt at montere spande- og bækkenholder. Monteres med skruetrækker. Komplet sæt.
 Materiale: Polyamid.



Hælremme

Varenr. 80209522
 Monteres på fodpladerne. Forhindrer fødderne i at glide bagud. Kan reguleres i længden. Leveres som par.



Lav montering af bækken

Varenr. 80209259
 Med denne adapter placeres bækkenholderen 6 cm lavere under sædet. Monteres med bækken- eller spandeholder og monteringsbeslag.
 Materiale: Polypropylen.



Korte fodstøtter

Varenr. 80209520
 En kort fodstøtte der kan svinges til siden. Fodpladen har en afrundet form. Leveres som par.
 Materiale: Rustfrit stål og Polypropylen.




Bækkenlås

80209049
 Holder bækkenet på plads, når stolens tilt-funktion benyttes. Passer til Swift Mobil Tilt-2.
 Material: Polypropylen



Opklappelige fodstøtter

Varenr. 80209446
 Justerbar for de brugere der har brug for en mere åben fodvinkel. Hælstropper kan monteres (bestilles separat). Leveres som par.
 Materiale: Rustfrit stål og Polypropylen.

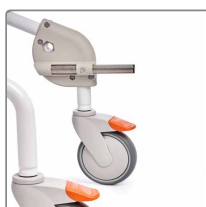

Trædestang

Varenr. 80209449
 Letter færdigen over f.eks. dørtrin eller ramper. Leveres komplet med beslag.
 Materiale: Polypropylen og Aluminium.



Vinklede fodstøtter, vid vinkel

Varenr. 80209531
 Fodstøtterne kommer 5 cm længere væk fra rammen.
 Materiale: Rustfrit stål og Polypropylen.



Tipsikring Swift Mobil Tilt-2

Varenr. 80209459
 Minimerer risikoen for at stolen tipper bagover. Anbefales især når tyngdepunktet er bagest i stolen, f.eks. ved benamputation.
 Materiale: Polypropylen og Aluminium.



Vinklede fodstøtter, snæver vinkel

Varenr. 80209532
 Fodstøtterne kommer 4 cm tættere på rammen. (Kan ikke benyttes sammen med kit for øget afstand ml. benstøtter 80209525)
 Materiale: Rustfrit stål og Polypropylen.

Tilbehør



Ben- og lægstøtte

Varenr. 80209437
Vinkelregulerbar ben- og lægstøtte, der passer både til højre og venstre side. Kan indstilles i fire vinkel positioner. Leveres stykvis. Materiale: Rustfrit stål og ABS-plastik.



Amputationsbenstøtte

Varenr. 80209510
Justerbar i højde, længde og vinkel. Kan monteres i både højre eller venstre side. Er brugeren benamputeret, anbefales tipsikring.
Materiale: Rustfrit stål og polyurethan.



Betræk til ben- og lægstøtte

Varenr. 80209535
Med polstring der giver en blødere og mere behagelig overflade til benet.
Består af to dele: en indvendig polstret og vandtæt del og en ydre del med en overflade, der er let at tørre af.



Kit for øget afstand ml. benstøtter

Varenr. 80209525
Øger afstand mellem benstøtterne med 12 cm. Er monteret som standard på Swift Mobil-2 XL og Swift Mobil Tilt-2 XL.



Fodplade til ben- og lægstøtte

Varenr. 80209443
Kit med separat fodplade, som kan monteres sammen med ovenstående ben- og lægstøtte.
Materiale: ABS plastik.



Drivhjulskit 24"

Varenr. 80209436
Med inbyggede fæster for tipsikring. 24" drivhjul med massive dæk inkl. fæste og bremse. Nemt at montere.
Materiale: Polyamid, Rustfrit stål, Polyurethan og Aluminium.



Vaskeinstruktioner

Sæde uden åbning bagtil, Komfortsæder, Blødt sæde uden åbning, Hovedstøtte, Hovedstøtte – opret Lås til armlæn, Urinfanger, Bækken, Bækkenholder, Monteringsbeslag, Lav montering af bækken, Spandeholder, Spand, Tipsikring, Trædestang, Fodstøtter, Ben- og lægstøtte, Vinklede fodstøtter, Amputationsbenstøtte, Drivhjulskit 24", Fast ryg – aftørbar.



Ryglæn, Hofte-/brystbælte (polstret), Hoftebælte, Brystbælte, Hælstropper.



Bløde sædepuder, Komfort rygovertæk, Blød rygpude, Armlænsputer, Hemiplegiarmlæn, Tværlås, Betræk til ben- og lægstøtte.



Vaske-symboler



Maskinvask - max. temperatur 60 °C



Rengør / desinficer produktet med et standard-rengøringsmiddel uden slibemiddel med en pH-værdi mellem 6 og 9, eller med en 70 % desinfektionsopløsning.




Autoklave ved max. 85 °C i 3 minutter




Mål



Model	Længde	Bredde	Sædehøjde	Ryghøjde	Sædedybde
Swift Mobil-2	93 cm	58/64 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5 cm
Swift Mobil-2 XL	93 cm	61/64/70 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5 cm
Swift Mobil 24"-2	106 cm	74 cm	45 / 60 cm	50 cm	46,5 cm
Swift Mobil Tilt-2	102 cm	58/64 cm	50 / 65 cm	55 cm	46,5 cm
Swift Mobil Tilt-2 XL	102 cm	61/64/70 cm	50 / 65 cm	55 cm	46,5 cm

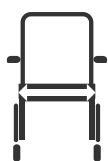

Model	Underbenslængde	Sædebredde	Armlæns højde	Bredde mellem armlæn	Dybde mod væg
Swift Mobil-2	34 / 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	54 cm (47 cm*)
Swift Mobil-2 XL	34 / 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	54 cm
Swift Mobil 24"-2	34 / 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	67 cm
Swift Mobil Tilt-2	34 / 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	42/48/54 cm	60 cm
Swift Mobil Tilt-2 XL	34 / 46,5 cm	50 cm	22/25/28 cm	48/54/60 cm	60 cm

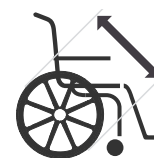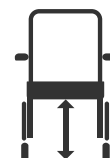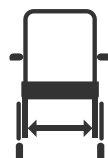

Model	Højde	Forhjul	Bredde under sæde	Frihøjde over toilet	Baghjul
Swift Mobil-2	95-110 cm	125 mm	400 mm	390-540 mm	-
Swift Mobil-2 XL	95-110 cm	125 mm	400 mm	390-540 mm	-
Swift Mobil 24"-2	95-110 cm	125 mm	400 mm	420-570 mm	610 mm
Swift Mobil Tilt-2	100-115 cm	125 mm	400 mm	430-580 mm	-
Swift Mobil Tilt-2 XL	100-115 cm	125 mm	400 mm	430-580 mm	-



Model	Turning radius	Max brugervægt	Vægt
Swift Mobil-2	ø 990 mm	160 kg	16,6 kg
Swift Mobil-2 XL	ø 990 mm	160 kg	17,3 kg
Swift Mobil 24"-2	ø 1210 mm	160 kg	25,1 kg
Swift Mobil Tilt-2	ø 1040 mm	160 kg	20,4 kg
Swift Mobil Tilt-2 XL	ø 1040 mm	160 kg	21 kg

* 8022 9489



Swift Mobil-2, Family Toldaer_02_DK01 - 2024 - Forbehold for trykfejl og evt. ændringer

Etac er en af verdens førende udviklere og forhandlere af ergonomiske hjælpemidler og løsninger til forflytning og patienthåndtering. Siden 1973 har vi arbejdet engageret for at skabe de bedste løsninger til øget livskvalitet for den enkelte, dennes familie og hjælpere.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder og produktinformationer på www.etac.dk

Etac A/S

+45 79 68 58 33

info@etac.dk

www.etac.dk

etac[®]

Creating Possibilities